

FPC60

Sistema FPC60 de llenado/acabado completamente automático

Características y ventajas


- Preparado para sistemas de barrera de acuerdo con el Anexo 1
- Minimice el riesgo de contaminación: sin intervenciones de operarios y con configuración automática
- Llenado de alta precisión de volúmenes de 0.2-100 ml a hasta $\pm 0,5$ %
- Reduzca el tiempo de inactividad y aumente el tiempo de funcionamiento: no se necesitan herramientas y la configuración entre lotes es mínima
- Arranque con cero desperdicio y sin piezas de formato para toda la gama de frascos
- Registro completo de auditoría con los cambios del operario
- Acceso digital remoto y gabinete independiente de servicios



Especificaciones técnicas

	FPC60
Volumen de llenado	0.2-100 ml
Precisión	hasta $\pm 0,5$ %
Capacidad máx.	1500 unidades/hora
Temperatura de operación	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Fuente de alimentación	200 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Max 3200 W
Peso	1800 kg (3968 lb)
Tamaño del frasco	ISO 8362 2R - 100H, frascos CZ de 2 ml a 100 ml
Topes	Estándar ISO o LYO, 13 mm y 20 mm
Bandejas de alimentación y salida	Ancho de la bandeja de alimentación: 185 mm - 360 mm, Ancho de la bandeja de salida: 180 mm - 360 mm, bandeja de alimentación opcional para frascos adaptiQ + EZfill RTU preesterilizados

Dimensiones de FPC60

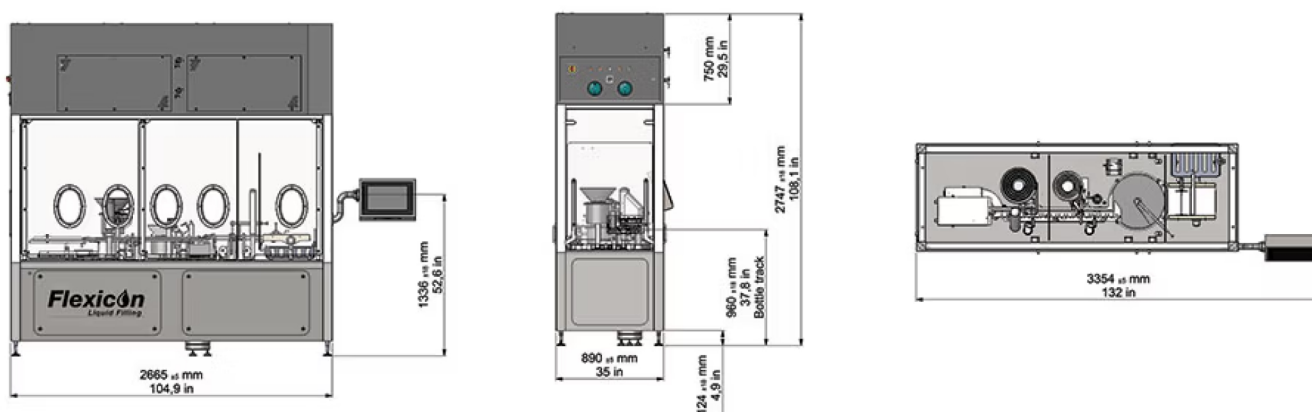

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo, Watson-Marlow Flexicon A/S rechaza toda responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. ADVERTENCIA: Estos productos no están diseñados para aplicaciones conectadas a pacientes y no deben utilizarse en tales aplicaciones. WMArchitect y Accusil son marcas comerciales registradas.



wmfts.com/global
06 May 2026