

Attuatori serie AKS per valvola serbatoio pneumatica

Attuatori pneumatici per valvole serbatoio

Caratteristiche e vantaggi

- Design igienico, con il numero di serie inciso al laser sul corpo dell'attuatore per garantire la completa tracciabilità del prodotto e la conformità alle norme cGMP
- Struttura leggera in acciaio inox e plastica con manicotto in acciaio inox 304 e volantino in nylon
- Opzioni di comando pneumatico per soddisfare tutte le esigenze di processo
- Indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura



Specifiche tecniche


	Attuatori serie AKS per valvola serbatoio pneumatica
Dimensioni	0,5", 1,0", 1,5"
Indicazione della posizione	L'indicazione della posizione sui manicotti dell'attuatore manuale e sugli alberi dell'attuatore pneumatico fornisce la conferma visiva della posizione della valvola
Giunto di connessione pneumatico	Raccordo NPT da 1/8 di pollice
Dimensioni connettore tubi pneumatici	1/4 poll.
Pressione di esercizio max.	10 bar (150 psi)
Temperatura d'esercizio	Up to 135 °C (275 °F)
Pressione min. di esercizio manometro	70 psig
Pressione max. di esercizio manometro	100 psig
Valvole compatibili	Valvole per serbatoi a membrana senza barriera con tenuta radiale standard (90 gradi)
Certificazione e conformità	ISO 9001
Norme	3-A, ASME BPE, ATEX 2014/34/UE, CE Ex II2G Ex h II8 T3 Gb, CE-PED

Direttiva ATEX 2014/34/UE (disponibile su richiesta). Non standard

Materiali di costruzione

	Attuatori serie AKS per valvola serbatoio pneumatica
Alloggiamento	Acciaio inox 304, Nylon
Albero attuatore	Acciaio inox 304
O-ring	EPDM
Guarnizioni	EPDM

Dimensioni Attuatori serie AKS per valvola serbatoio pneumatica

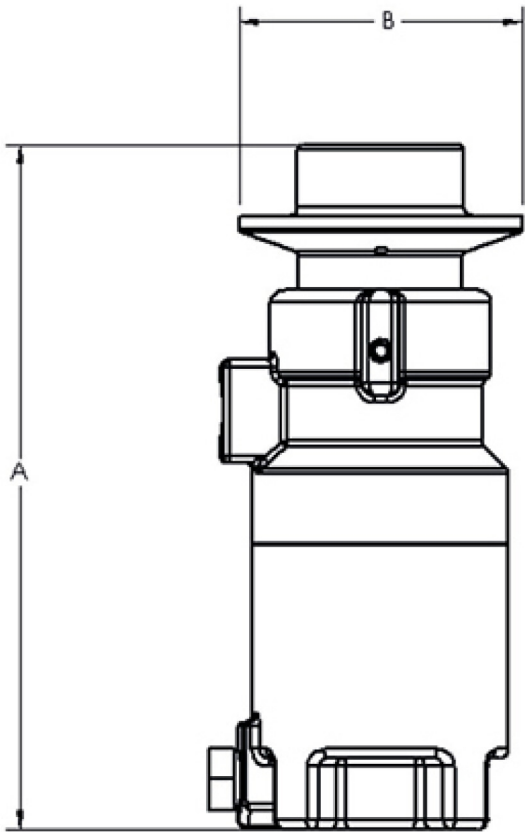

Dimensioni	A mm (pollici)	B mm (pollici)	Corsa max mm (pollici)	Peso (con volantino in plastica) kg (lb)	Spazio necessario per la rimozione mm (pollici)
0,5	122,3 (4,8)	50,4 (2,0)	4,3 (0,2)	0,5 (1,0)	172,7 (6,8)
1,0	149,8 (5,9)	75,8 (3,0)	7,3 (0,3)	1,1 (2,5)	226,1 (8,9)
1,5	151,8 (6,0)	75,8 (3,0)	7,7 (0,3)	1,1 (2,5)	228,6 (9,0)

Codici prodotto

Numero prodotto	Descrizione prodotto
PN05-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 0,5"
PN10-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,0"
PN17-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,5"
PN05-01-EX	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 0,5"
SP05-01-EX	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 0,5"
PN10-01-EX	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,0"
PN17-01-EX	Attuatore pneumatico AKS per valvola serbatoio radiale senza barriera da 1,5"

Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Asepco declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Radial diaphragm è un marchio di fabbrica di ASEPCO Corporation. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.



wmfts.com/global
09 July 2026