

620Di e 620DiN con testa 620LG

Pompe di erogazione serie 620

Caratteristiche e vantaggi

- Inserimento da tastiera della portata da 0,001 L/min a 18 L/min
- Eroga 500 ml con tolleranza del $\pm 0,5$ %
- Memorizza fino a 50 programmi di erogazione
- Fino a 4 bar di pressione
- Rapporto di comando 2650:1 (gamma di velocità da 0,1 a 265 giri/min)
- Regolazione digitale della velocità con scelta di 0,1 giri/min, 0,5 giri/min, 1 giro/min, 2 giri/min, 5 giri/min e 10 giri/min
- Motore CC brushless che non richiede manutenzione
- Alloggiamento liscio facile da pulire e privo di ricettacoli per i germi



Prestazioni 620Di e 620DiN con testa 620LG

Portate (L/min) (su una gamma di velocità da 0,1 a 265 giri/min)	Elemento a Y (monocanale)			Tubo continuo (portata per canale - max 2 canali)		
Materiale tubo	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
Pumpsil silicone	0,002-4,6	0,003-8,5	0,005-11,5	0,001-2,3	0,002-4,3	0,003-5,8
Marprene, Bioprene	0,002-4,6	0,003-8,5	0,005-11,5	0,001-2,3	0,002-4,3	0,003-5,8
STA-PURE PCS	0,002-5,2	0,003-9,0	0,005-12,4	0,001-2,6	0,002-4,5	0,003-6,2
Dosaggi 620LG (STA-PURE PCS®, STA-PURE PFL®)						
Diametro interno tubo	8,0 mm		12,0 mm		16,0 mm	
Dose minima possibile	10 ml		17 ml		23 ml	
Minimo consigliato	99 ml		167 ml		234 ml	


Specifiche tecniche

	620Di e 620DiN con testa 620LG
Volume di riempimento	Up to 500ml in 2.4s ml
Precisione	$\pm 0,5$ %
Protezione ingresso	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Temperatura d'esercizio	5 °C a 40 °C (40 °F a 104 °F)
Rapporto di comando della velocità	2650:1
Umidità	80% (senza condensa) fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino al 50% a 40 °C (104 °F), U.r. da 10 a 100% (con condensa)
Rumorosità	< 70dB(A) a 1 m
Norme	CE, cETLus
Alimentazione	50/60 Hz, Da 100 V a 120 V, Da 200 V a 240 V, Monofase
Peso	24.3 - 25.2 kg (53.6 - 55.6 lb)
Accessori	Interruttore a pedale, interruttore manuale, cavo RS232, cavo di registrazione lotti
Dimensioni tubo compatibili	Diam. int. 12,0 mm, Diam. int. 16,0 mm, Diam. int. 8,0 mm, Spessore parete 4,0 mm

Materiali di costruzione

	620Di e 620DiN con testa 620LG
Cuscinetti	Acciaio al carbonio
Alloggiamento	Alluminio pressofuso LM24
Tastiera/interfaccia operatore	Poliestere
Gruppo del rullo testa	Acciaio inox

Dimensioni 620Di e 620DiN con testa 620LG

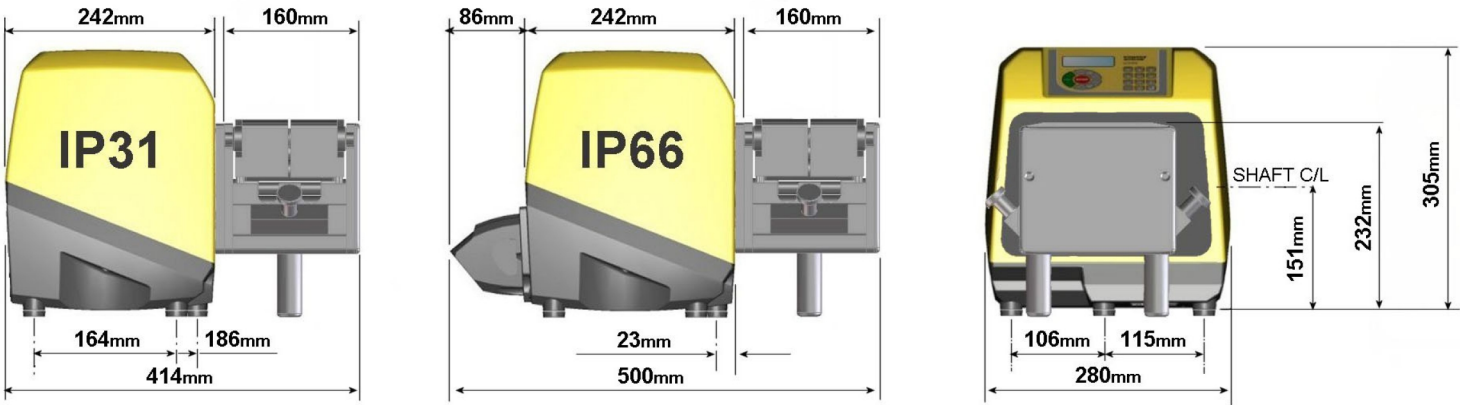

Opzioni di comando

Funzionalità	620Di	620DiN
Alloggiamento - Classe di protezione in ingresso	IP31	IP66
Comando manuale		
Comando velocità digitale con taratura semplice per visualizzare la portata	✓	✓
Sceita della visualizzazione della portata; unità metriche o imperiali	✓	✓
Tastiera numerica per l'immissione di velocità, portata o codice PIN	✓	✓
Comando a distanza		
Funzionamento/arresto, cambio di direzione, modalità automatica/manuale, ingresso rilevatore di perdite (tramite chiusura contatto o logica industriale da 5 V TTL a 24 V)	✓	✓
Funzionamento a distanza del dosaggio (interruttore a pedale/manuale o ingresso logico)	✓	✓
Quattro uscite di stato digitali programmabili attraverso una logica industriale da 5 V TTL a 24 V		✓
Feedback analogico della velocità		
Uscita contagiri; 0-1478 Hz	✓	✓
Comunicazione digitale		
Comando seriale di rete digitale RS232 RS485	RS232	RS485
Funzionalità di erogazione specialistica		
Funzione di controllo del gocciolamento (inversione di direzione momentanea alla fine della dose)	✓	✓
Controllo della rampa per migliorare la precisione ed evitare spruzzi o schiuma	✓	✓
Esportazione di record in batch su PC o stampante per requisiti cGMP RS232	RS232	
Doppia protezione delle impostazioni della pompa con codice PIN operatore/supervisore	✓	✓

Codici prodotto

Codici prodotto							
Testa 620LG		Accessori					
Solo testa	063.4623.000	Interruttore a pedale	Interruttore manuale	Cavo RS232	Cavo di registrazione lotti		
Pompe per pulizia con panno IP31/NEMA 2		IP31	IP31	IP31	IP31		
620Di/LG	060.4171.5G0*	059.3002.000	059.3022.000	059.3121.000	059.3125.000		
* Sostituire l'ultimo zero con A, E, U, K, R, D, Z o C per la spina di alimentazione da 2,8 m americana, europea, britannica, australiana, argentina, sudafricana, cinese o svizzera							
Pompe per aree di lavaggio IP66/NEMA 4X		IP55			IP65		
620DiN/LG	060.417N.5G0**	069.5231.000	n/d	n/d	n/d		
** Sostituire l'ultimo zero con il tipo di spina A, C, K, R o Z							
		Elemento a Y			Tubo continuo		
Dimensioni diametro interno (spessore parete di 4,0 mm)		8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm	8,0 mm	12,0 mm	16,0 mm
Materiale tubo							
Pumpsil silicone		913.AE80.K40	913.A12E.K40	913.A16E.040	913.A080.040	913.A120.040	913.A160.040
Marprene		902.E080.K40	902.E120.K40	902.E160.040	902.0080.040	902.A120.040	902.0160.040
Bioprene		933.E080.K40	933.E120.K40	933.E160.040	933.0080.040	933.A120.040	933.0160.040
STA-PURE PCS		961.E080.K40	961.E120.K40	961.E160.040			
PureWeldXL			942.E120.K40			942.0120.040	
				Set di morsetti per tubo continuo			069.4001.000
NB: Potenzialità di pressione di 4 bar con elementi STA-PURE PCS							

NB: Potenzialità di pressione di 4 bar con elementi STA-PURE PCS

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e non devono, pertanto, essere usati per tali applicazioni. WMArchitect e Accusil sono marchi registrati.



wmfts.com/global
28 September 2026