

620LG 펌프헤드를 장착한 620Di, 620DiN

Flexicon
Liquid Filling

620 시리즈 디스펜싱 펌프

특징 및 이점

- 0.001L/min - 18L/min의 키패드 유량 입력
- $\pm 0.5\%$ 이내의 정확도로 500 ml 디스펜싱
- 최대 50개의 디스펜싱 프로그램을 저장
- 최대 4bar 압력
- 2650:1 제어비(0.1 - 265rpm 속도 범위)
- 0.1rpm, 0.5rpm, 1rpm, 2rpm, 5rpm 및 10rpm 단계 변경을 선택할 수 있는 디지털 속도 조정
- 유지보수가 필요 없는 브러시가 없는 DC 모터
- 버그 트랩이 없는 부드럽고 청소하기 쉬운 케이스



620LG 펌프헤드를 장착한 620Di, 620DiN 성능

유량 범위(L/min)	Y 엘레먼트 튜빙			연속 튜빙		
(0.1 ~ 265rpm 속도 범위 이상)	(단일 채널)			(채널당 유량 - 최대 2개 채널)		
튜빙 재질	8.0mm	12.0mm	16.0mm	8.0mm	12.0mm	16.0mm
Pumpsil silicone	0.002-4.6	0.003-8.5	0.005-11.5	0.001-2.3	0.002-4.3	0.003-5.8
Marprene, Bioprene	0.002-4.6	0.003-8.5	0.005-11.5	0.001-2.3	0.002-4.3	0.003-5.8
STA-PURE PCS	0.002-5.2	0.003-9.0	0.005-12.4	0.001-2.6	0.002-4.5	0.003-6.2
620LG 선량 크기(STA-PURE PCS®, STA-PFL®)						
튜브 내경	8.0mm		12.0mm	16.0mm		
최소 가능 선량	10ml		17ml	23ml		
최소 권장	99ml		167ml	234ml		


기술 사양

	620LG 펌프헤드를 장착한 620Di, 620DiN
충진 체적	Up to 500ml in 2.4s ml
정확성	$\pm 0.5\%$
유입 차단	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
작동 온도	5 °C 까지 40 °C (40 °F 까지 104 °F)
속도 제어비	2650:1
습도	(비응축) 31°C(88°F)까지 80 %, 40°C(104°F)에서 50%까지 선형으로 감소, (응축) 10-100% RH
노이즈	1m에서 <70dB(A)
표준	CE, CETLus
공급 전원	100V - 120V, 200V - 240V, 50/60Hz, 단상
중량	24.3 - 25.2 kg (53.6 - 55.6 lbs)
부속품	풋 스위치, 핸드스위치, RS232 케이블, 일괄 기록 케이블
호환 가능한 튜빙 크기	12.0 mm ID, 16.0 mm ID, 4.0mm 벽 두께, 8.0 mm ID

구성 재질

	620LG 펌프헤드를 장착한 620Di, 620DiN
베어링	탄소강
케이스워크	압력 다이캐스트 알루미늄 LM24
키패드/HMI	폴리에스테르
펌프헤드 롤러 어셈블리	스테인레스강

620LG 펌프헤드를 장착한 620Di, 620DiN 치수

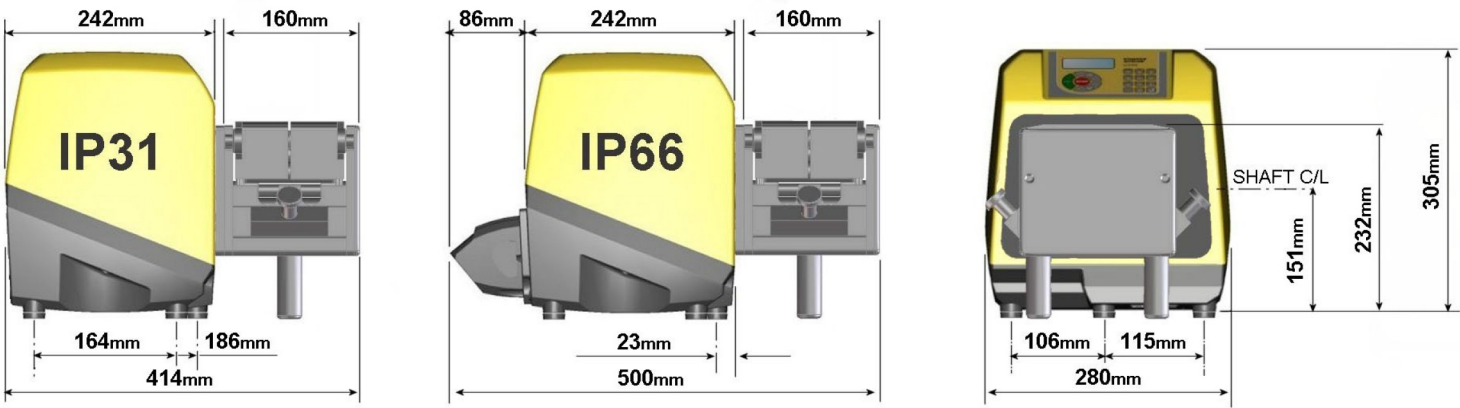

제어 옵션

기능	620Di	620DiN
엔클로저 - 침투 방지 등급	IP31	IP66
수동 제어		
흐름을 표시하기 위한 간단한 교정을 통한 디지털 속도 제어	✓	✓
유량 표시 선택, 미터법 또는 영국 단위	✓	✓
속도, 흐름 또는 핀 코드를 입력할 수 있는 숫자 키패드	✓	✓
원격 제어		
작동/정지, 방향 변경, 자동/수동 모드, 누출 감지기 입력(접점 폐쇄 또는 24V 산업용 로직에 5V TTL 사용)	✓	✓
투약용 원격 작동(푸/핸드스위치 또는 로직 입력)	✓	✓
5V TTL - 24V 산업 로직을 통해 4개의 프로그램식 디지털 상태 출력		✓
아날로그 속도 피드백		
타코미터 출력; 0 - 1,478Hz	✓	✓
디지털 통신		
디지털 네트워크 직렬 제어 RS232 RS485	RS232	RS485
전문가 디스펜싱 기능		
드립 컨트롤 기능(투여 종료 시 일시적으로 방향 역전)	✓	✓
램프 컨트롤을 사용하여 정확도를 높이고 튀거나 거품이 생기는 것을 방지합니다	✓	✓
cGMP 요구 사항을 위해 배치 기록을 PC 또는 프린터로 내보냅니다 RS232	RS232	
이중 작업자/감독자 핀 코드 펌프 설정 보호	✓	✓

제품 코드

제품 코드						
620LG 펌프헤드		부속품				
펌프헤드만 해당	063.4623.000	풋 스위치	핸드 스위치	RS232 케이블	일괄 기록 케이블	
IP31/NEMA 2 물매 제거 펌프		IP31	IP31	IP31	IP31	
620Di/LG	060.4171.5G0 *	059.3002.000	059.3022.000	059.3121.000	059.3125.000	
* 2.8m 미국, 유럽, 영국, 호주, 아르헨티나, 남아프리카, 중국 또는 스위스 전원 플러그의 경우 마지막 0을 A, E, U, K, R, D, Z 또는 C로 교체하십시오.						
IP66/NEMA 4X 세척 펌프		IP55			IP65	
620DiN/LG	060.417N.5G0**	069.5231.000	해당 안 됨	해당 안 됨	해당 안 됨	
** 마지막 0을 A, C, K, R 또는 Z 플러그 유형으로 교체하십시오.						
	Y 엘레먼트 튜빙			연속 튜빙		
보어 크기(4.0mm 벽 두께)	8.0mm	12.0mm	16.0mm	8.0mm	12.0mm	16.0mm
튜빙 재질						
Pumpsil silicone	913.AE80.K40	913.A12E.K40	913.A16E.040	913.A080.040	913.A120.040	913.A160.040
Marprene	902.E080.K40	902.E120.K40	902.E160.040	902.0080.040	902.A120.040	902.0160.040
Bioprene	933.E080.K40	933.E120.K40	933.E160.040	933.0080.040	933.A120.040	933.0160.040
STA-PURE PCS	961.E080.K40	961.E120.K40	961.E160.040			
PureWeldXL		942.E120.K40			942.0120.040	
			연속 튜브용 클램프 세트			069.4001.000
주의: STA-PURE PCS 엘레먼트를 사용한 4bar 압력 가능						

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



28 September 2026