

Actionneurs manuels de vanne de cuve série AJS



Actionneurs manuels de vanne de cuve

Caractéristiques et avantages

- Conception hygiénique avec numéros de série gravés au laser garantissant une traçabilité totale des produits et le respect des bonnes pratiques de fabrication
- Construction en acier inoxydable pour les environnements à usage intensif
- Options de commande manuelle pour répondre aux besoins de votre process
- Indication visuelle de l'état Ouvert/Fermé
- Bagues en PTFE et joints toriques EPDM pour une durabilité maximale
- Compatibles avec les interrupteurs de toutes marques




Spécifications techniques

	Actionneurs manuels de vanne de cuve série AJS
Tailles	0,5", 1,0", 1,5", 2,0", 3,0", 4,0"
Indication de la position	Arbre indicateur de position pour une indication visuelle de la position de la vanne, Tige montante
Pression de service max.	10 bar (150 psi)
Températures de fonctionnement	Jusqu'à 135 °C (275 °F)
Vannes compatibles	Vannes de cuve à membrane radiale sans seuil standard (90 degrés)
Certification et conformité	ISO 9001
Normes	3-A, ASME BPE, CE-PED

Matériaux de construction

	Actionneurs manuels de vanne de cuve série AJS
Corps	Acier inoxydable 304, Aluminium anodisé noir
Arbre d'actionneur	Acier inoxydable Gall-Tough®, Acier inoxydable Nitronic 60
Joint torique	EPDM
Joints	EPDM
Roulements	Acier inoxydable, Nylon

Dimensions : Actionneurs manuels de vanne de cuve série AJS

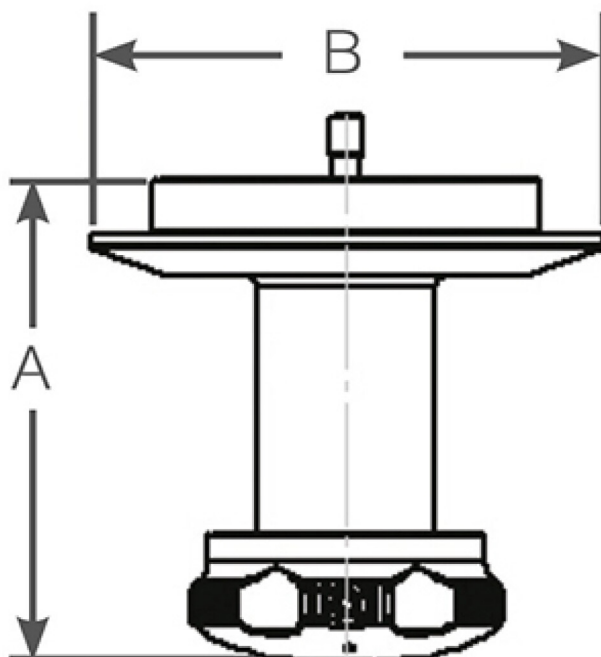

Manual

Taille	A mm (pouces)	B mm (pouces)	Course max. mm (pouces)	Poids (avec poignée en plastique) kg (lb)	Dégagement requis pour la dépose en mm (pouces)
0,5	61,0 (2,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	0,5 (1,1)	86,4 (3,4)
1,0	71,1 (2,8)	76,2 (3,0)	7,9 (0,3)	1,0 (2,2)	104,1 (4,1)
1,5	99,1 (3,9)	76,2 (3,0)	14,2 (0,6)	1,1 (2,4)	142,2 (5,6)
2,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	14,2 (0,6)	2,1 (4,7)	142,2 (5,6)
3,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	19,8 (0,8)	2,1 (4,7)	193,0 (7,6)
4,0	139,7 (5,5)	165,1 (6,5)	25,4 (1,0)	6,2 (13,7)	246,4 (9,7)

Codes produit

Numéro de produit	Description du produit
MN05	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 0,5"
MN10	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 1,0"
MN17	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 1,5"
MN20	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 2,0"
MN30	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 3,0"
MN40	Actionneur manuel AJS de vanne radiale sans seuil pour cuve de 4,0"

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document sont réputées exactes, cependant ASEPCO décline toute responsabilité en cas d'éventuelle erreur, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit avec l'application prévue. Radial-Diaphragm est une marque commerciale de ASEPCO Corporation. Tri-Clamp est une marque déposée de Alfa Laval Corporate AB. Membre de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, Filiale de Spirax-Sarco Engineering.



wmfts.com/global
09 July 2026