

520REM element pompkop

500 serie pompkoppen



Kenmerken en voordelen

- Opbrengsten tot 1500 ml/min (23,78 USGPH) bij een piekdruk van 4 bar (60 psi) met 520 LoadSure®-elementen
- Biedt een groot slagvolume met veerbelaste rollers voor het uiterst nauwkeurig, behoedzaam verpompen van shear-gevoelige vloeistoffen
- Robuuste pompkopconstructie met PPS (polyfenyleensulfide) slangbedding en rotor, en roestvrijstalen rollers en lagers



520REM element pompkop prestaties

520REM pompkoppen met twee rollers voor LoadSure® slangelementen — met opbrengsten — ml/min. (USGPH)			
Slangmateriaal	Snelheid	3,2mm	6,4 mm
Pumpsil®, GORE® STA-PURE® pompslangen – Serie PCS, GORE® STA-PURE® pompslangen – Serie PFL	0,1 - 220 tpm	0,18-390 (0-6,18)	0,70-1.500 (0,01-23,8)
Marpren® TM, Biopren® TM	0,1 - 220 tpm	0,17-370 (0-5,86)	0,67-1.500 (0,01-23,8)

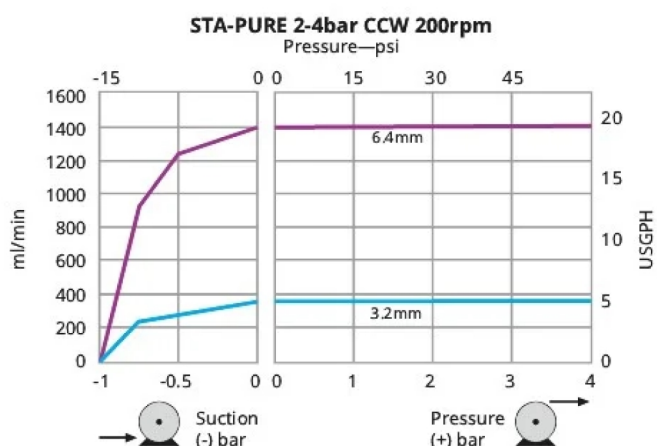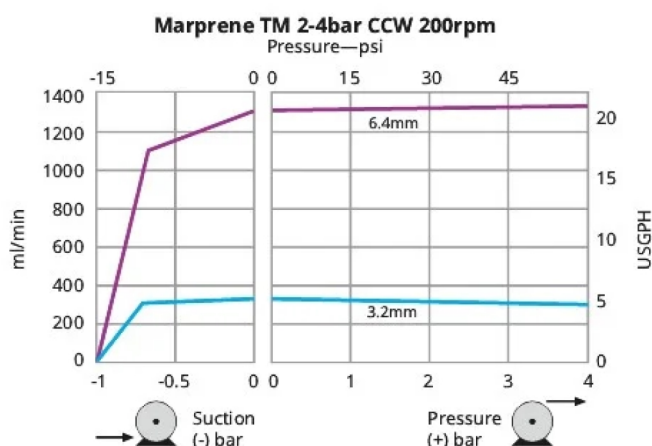

Technische specificaties

	520REM element pompkop
Aantal kanalen	1
Aantal rollers	2
Max. continue opbrengst	1500 ml/min
Max. continue opbrengst	90.54 l/h (23.78 USGPH)
Type pomp	Cased, Paneelmontage
Grootte compatibele slangdiameter	3.2, 6.4 mm



Constructie materialen

	520REM element pompkop
Pompkopbehuizing	Polycarbonaat (PC), Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkopdeksel	Polycarbonaat (PC)
Pompkop baan	Polyfenyleensulfide (PPS)
Pompkoproller	Met MoS2 gevulde nylon 6 (Nylatron), Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316
Pompkoprotor	Polyfenyleensulfide (PPS), Roestvrij staal 316

De vermelde informatie heeft betrekking op het volledige assortiment.

Voor gedetailleerde specificaties van individuele modellen/componenten kunt u de gebruikershandleiding raadplegen of contact opnemen met de vertegenwoordiger van WMFTS.

520REM element pompkop afmetingen

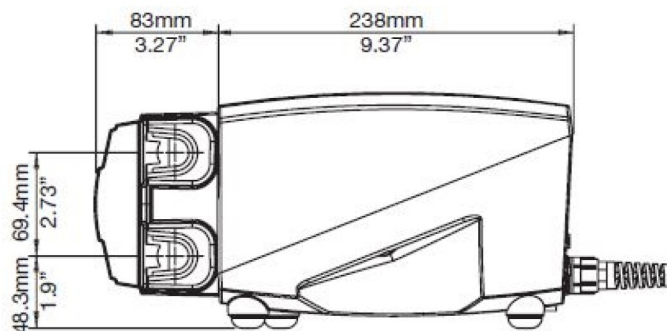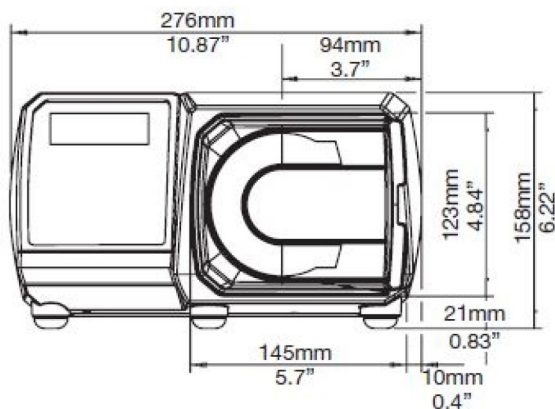

Productcodes

Omschrijving			Onderdeelcode	
520REM element pompkop			053.1011.EM0	
Productcodes elementen voor 520REM				
	Industriële LoadSure®-elementen, PVDF-connectoren met snelkoppeling		Sanitaire LoadSure® elementen, 3/4 in sanitaire PVDF-connectoren	
	3,2mm	6,4 mm	3,2mm	6,4 mm
Bioprene® TM			933.P032.PFT	933.P064.PFT
Marpene® TM	902.P032.PFQ	902.P064.PFQ		
STA-PURE® serie PCS			961.M032.PFT	961.M064.PFT
STA-PURE® serie PFL	966.M032.PFQ	966.M064.PFQ	966.M032.PFT	966.M064.PFT

Disclaimer: Alle getoonde opbrengsten werden verkregen door water te pompen bij 20 °C (68 °F) zonder koppelen voor aanzuiging en toevoer. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene en Marprene zijn handelsmerken van Watson-Marlow Limited. Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn; Watson-Marlow Limited accepteert echter geen aansprakelijkheid voor enige fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving specificaties te wijzigen. GORE en STA-PURE zijn handelsmerken van W. L. Gore & Associates. Gelieve bij het bestellen van pompen en slangen de productcode te vermelden.



wmfts.com/global
29 April 2026