

PF22/QC22

PF22 Máquina de enchimento peristáltico

Flexicon
Liquid Filling


Recursos e benefícios

- Volumes de enchimento de 5-5000 ml com precisão de $\pm 0,5\%$
- A troca da via de fluido pode ser feita em menos de um minuto
- Precisão de enchimento constante, evitando excesso de enchimento dispendioso
- Sem formação de espuma, respingos ou gotejamentos entre os enchimentos
- Ausência de contaminação mútua



Desempenho PF22/QC22

PF22 – capacity diagram (based on water)

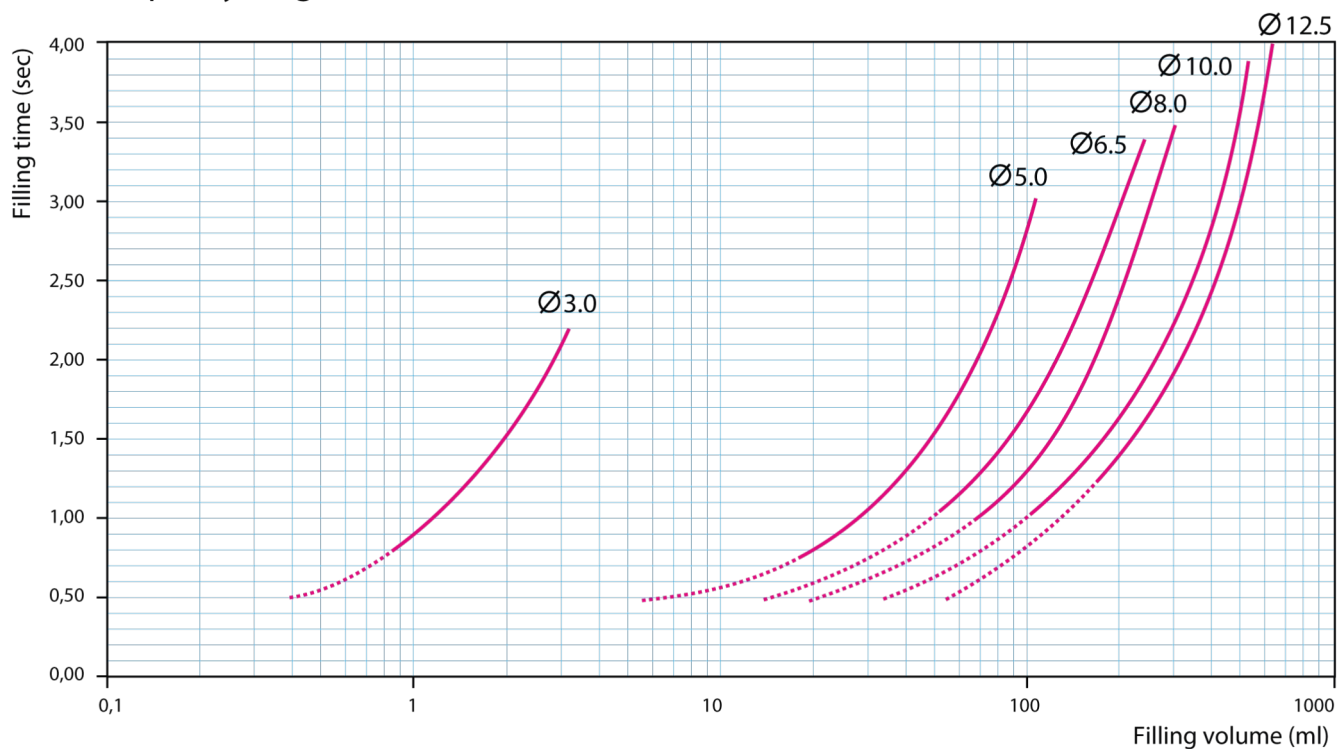


Especificações técnicas

	PF22/QC22
Volume de enchimento	5-5000 ml
Precisão	$\pm 0,5\%$
Proteção de entrada	IP31
Fonte de alimentação	110/230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 350 W
Peso	25 kg (55 lb)
Acessórios	Bicos de enchimento, tubos, suporte de enchimento, sistema de bocais de mergulho pneumático, interruptor de pé, impressora
Tamanho das mangueiras compatíveis	D.I. 3,0 a 12,5 mm

Materiais de construção

	PF22/QC22
Caixa	Aço inoxidável AISI 304, Alumínio anodizado
Conjunto do corpo do cabeçote	Alumínio anodizado
Conjunto de roletes para cabeça	Aço inoxidável inox 304, Alumínio anodizado

Dimensões PF22/QC22

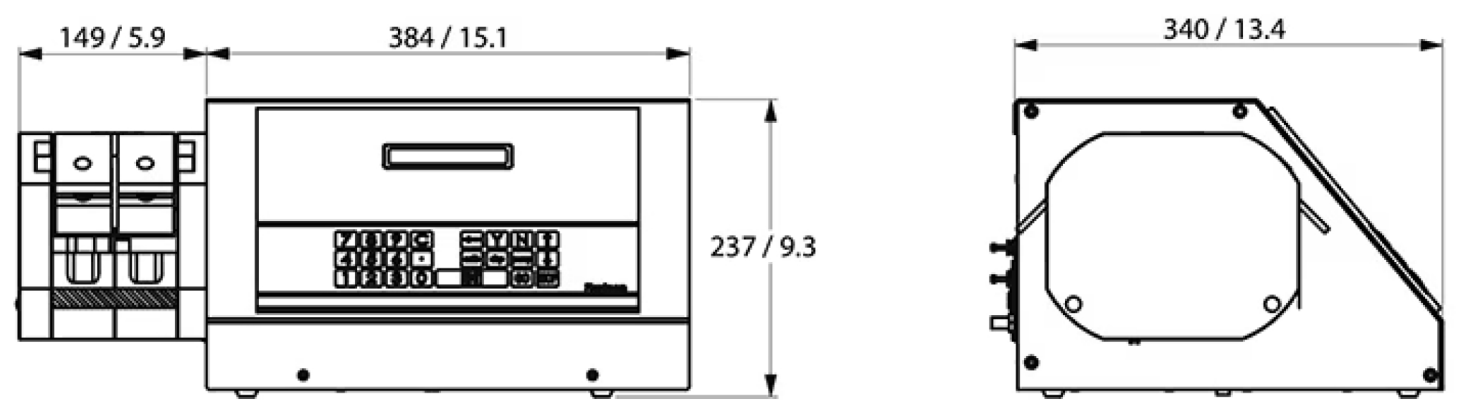

Dimensions in mm/inch

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.

wmfts.com/global
01 June 2026