

Hygienische Pumpe der Baureihe 825

Baureihe 800 - Prozesspumpen


Merkmale und Vorteile

- Max. Fördermenge von 2060 L/h und Druck von bis zu 3,5 bar
- CIP/SIP-Sterilisation mit voller Geschwindigkeit ohne Bypass
- Selbst ansaugend und Trockenlauf, ohne Ventile, Dichtungen oder Verschraubungen
- Türnäherungssensor für einen sicheren Zugang beim Schlauchwechsel oder Reinigen
- Optionen für Bioprene und STA-PURE Schlauchelemente, USP-Klasse VI und hygienische Edelstahlanschlüsse nach 3.1.B BS/EN 10204 zertifiziert.
- Ideal für zähflüssige oder scherungsempfindliche Produkte
- Optionen für Motor/Getriebe/Steuerung: feste Drehzahl, variable Drehzahl mit mechanischen Variatoren, Motoren mit fester Drehzahl mit Frequenzumrichter -Steuerung für Prozesssteuerung mit 4-20 mA/0-10 V, Fernst. Stopp/Start/Rückwärts und Frequenz Ausgang.
- Pumpenköpfe eignen sich für Flanschmotoren B5 mit Wechselstrom oder Drehstrom, konstanter oder elektronisch variabler Drehzahl



Hygienische Pumpe der Baureihe 825 – Leistung

Drehzahl (U/min)	Fördermenge (L/h)	Leistung des eingebauten Motors (kW)
8	162	0,37
10	196	0,37
13	260	0,55
17	327	0,55
21	412	0,55
26	507	0,55
28	563	0,55
33	658	0,55
36	721	0,55
40	796	0,55
47	933	0,75
53	1.050	0,75
59	1.169	0,75
67	1.327	0,75
74	1.474	1,1
84	1.672	1,1
90	1.787	1,1
104	2.060	1,1

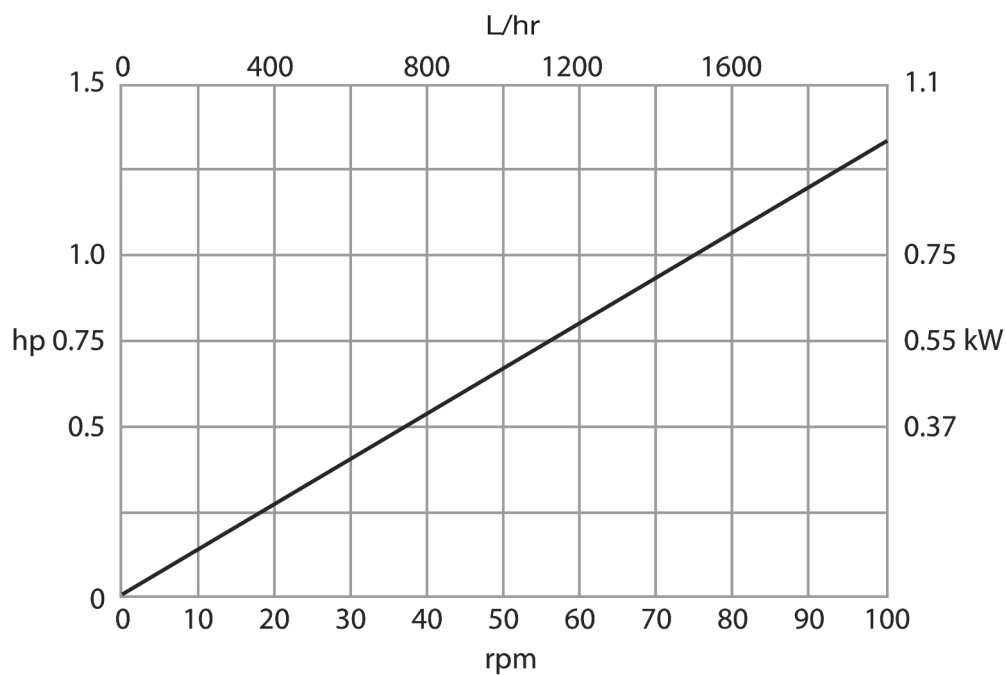


Technische Eigenschaften

	Hygienische Pumpe der Baureihe 825
Fördermenge	162 L/h bis 2060 L/h
Maximaler Betriebsdruck	3.5 bar (50.7 psi)
Flüssigkeitstemperatur	0 °C bis 80 °C (-32 °F bis 175 °F)
Motortypen	Motor mit fester Drehzahl, Motor mit variabler Drehzahl
Betriebsdrehzahl	8 U/min bis 104 U/min
Geräuschpegel	<75 dB(A) in 1 m Entfernung
Gewicht	85 kg (187 lb)

Werkstoffe

	Hygienische Pumpe der Baureihe 825
Befestigungen	Edelstahl, Verzinkter, hochfester Stahl
Grundrahmen	Edelstahl 304

Hygienische Pumpe der Baureihe 825 - Maße

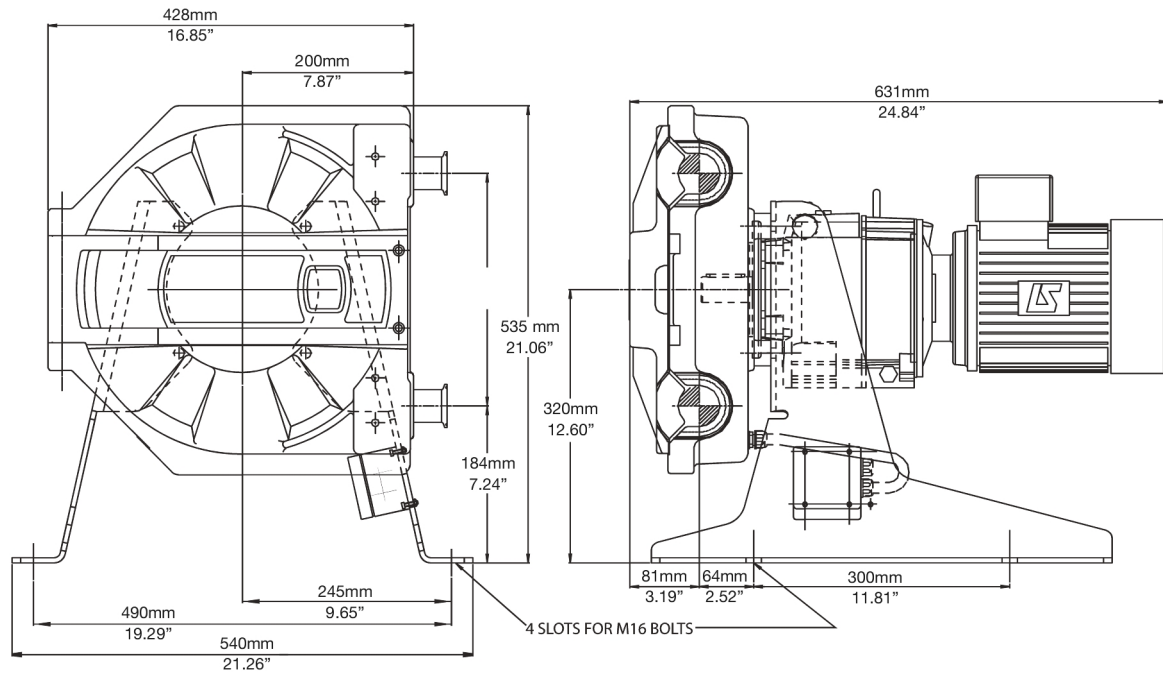

Haftungsausschluss: Alle angegebenen Fördermengen wurden durch Pumpen von Wasser mit 20 °C (68 °F) ohne Saug- und Förderhöhe ermittelt. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene und Marprene sind Marken von Watson-Marlow Limited. Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. GORE und STA-PURE sind Handelsmarken der W. L. Gore & Associates. Bei Bestellungen von Pumpen und Schlauchelementen bitte immer die Artikelnummern angeben.



wmfts.com/global
10 July 2026