

Atuadores manuais das válvulas dos tanque da Série AJS

Atuadores manuais para válvulas para tanques

Recursos e benefícios

- O design asséptico com números de série gravados a laser no corpo do atuador auxilia na total rastreabilidade do produto e das normas cGMP
- Construção em aço inoxidável para ambientes de trabalho pesado
- Opções de controlo manual para satisfazer as suas necessidades de processo
- Indicação visual de condição aberta/fechada
- Casquilhos em PTFE e o-rings em EPDM para uma maior durabilidade
- Monta facilmente comutadores de qualquer fabricante




Especificações técnicas

	Atuadores manuais das válvulas dos tanque da Série AJS
Tamanhos	0,5", 1,0", 1,5", 2,0", 3,0", 4,0"
Indicação de posição	Haste de elevação, O veio indicador de posição fornece uma confirmação visual da posição da válvula
Pressão de operação máxima	10 bar (150 psi)
Temperatura de operação	Até 135 °C (275 °F)
Válvulas compatíveis	Válvulas Weirless Radial para tanques standard (90 graus)
Certificação e conformidade	ISO 9001
Normas	3-A, ASME BPE, CE-PED

Materiais de construção

	Atuadores manuais das válvulas dos tanque da Série AJS
Carcaça	Aço inoxidável inox 304, Alumínio anodizado preto
Veio do atuador	Aço inoxidável Gall-Tough®, Aço inoxidável Nitronic 60
O-ring	EPDM
Vedantes	EPDM
Rolamentos	Aço inoxidável, Nylon

Dimensões Atuadores manuais das válvulas dos tanque da Série AJS

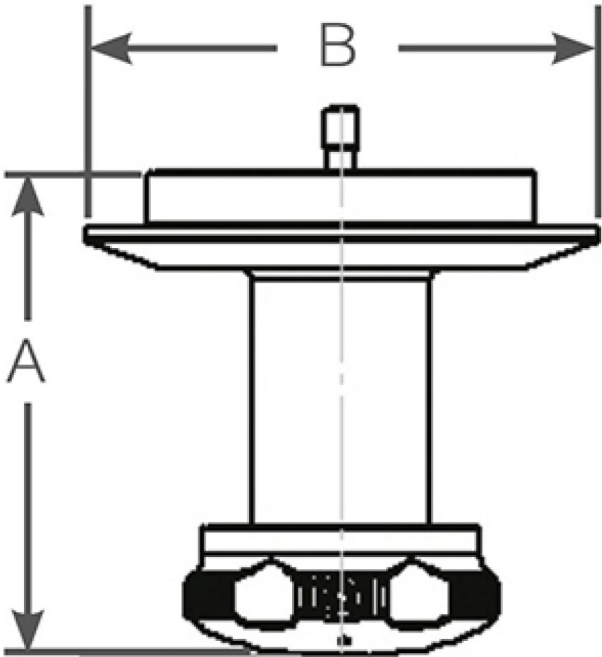

Manual

Dimensões	A mm (polegadas)	B mm (polegadas)	Curso máximo em mm (polegadas)	Peso (com alça plástica) kg (lb)	Folga necessária para remoção mm (polegadas)
0,5	61,0 (2,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	0,5 (1,1)	86,4 (3,4)
1,0	71,1 (2,8)	76,2 (3,0)	7,9 (0,3)	1,0 (2,2)	104,1 (4,1)
1,5	99,1 (3,9)	76,2 (3,0)	14,2 (0,6)	1,1 (2,4)	142,2 (5,6)
2,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	14,2 (0,6)	2,1 (4,7)	142,2 (5,6)
3,0	111,8 (4,4)	119,4 (4,7)	19,8 (0,8)	2,1 (4,7)	193,0 (7,6)
4,0	139,7 (5,5)	165,1 (6,5)	25,4 (1,0)	6,2 (13,7)	246,4 (9,7)

Códigos dos produtos

Número do produto	Descrição do produto
MN05	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 0,5"
MN10	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 1,0"
MN17	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 1,5"
MN20	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 2,0"
MN30	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 3,0"
MN40	Atuador manual AJS para válvulas para tanques radial de passagem livre de 4,0"

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a ASEPCO não se responsabiliza por nenhum erro que possa conter e se reserva o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Diafragma Radial é marca comercial da ASEPCO Corporation. Tri-Clamp é uma marca registrada da Alfa Laval Corporate AB. Integrante da Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, uma empresa Spirax-Sarco Engineering plc.



wmfts.com/global
09 July 2026