

FPC50

FPC50 충전, 멈춤 및 캡핑 시스템

Flexicon
Liquid Filling

특징 및 이점

- 간편한 세척 밸리데이션, 교차 오염이 없는 일회용 유체 경로 및 연동 펌프
- 충분한 자격 요건, 밸리데이션 지원
- 바이알용 포맷 부품이 없고, 스토퍼와 크림프/롤러 캡에 사용하는 범용 부품이 있어 빠른 전환이 가능
- 인라인 중량 체크 옵션을 갖춘 IPC (공정 내 제어)
- FDA 21 CFR Part 11 규정
- 풀 배치 리포트
- ISO8362 구성품과 호환 가능
- Annex 1에 따른 장벽 시스템 준비 (RABS)



기술 사양


	FPC50
충진 체적	0.1-100 ml
정확성	최대 $\pm 0.5\%$
최대 용량	1500 단위/시간
작동 온도	5 °C 까지 25 °C (41 °F 까지 77 °F)
공급 전원	110/230V AC, 220 V - 240 V AC, 50/60Hz
소비 전력	Max 1200 W
공기 공급/공압 연결	ISO 8573-1 2010 [1:4:2]에 따른 6 bar (87 psi)
공기 소비량	최대 100 L/min
인터페이스	가스 퍼지 밸브용 출력 신호 1개; 입자 카운터용 외부 인터페이스 2개; RABS와 통합
중량	400 kg (882 lbs)
바이알 크기	ISO 8362 2R - 100H
스토퍼	ISO 표준 또는 Lyo, 13mm 및 20mm
공급 및 토출 트레이	너비/열린 끝 최소 200mm/7.9" - 최대 305mm/12인치

용량: 최대 처리 용량

구성 재질

	FPC50
재질	POM, Teflon, 스테인레스강, 스테인리스강 AISI 316L, 양극화 알루미늄

FPC50 기본 치수

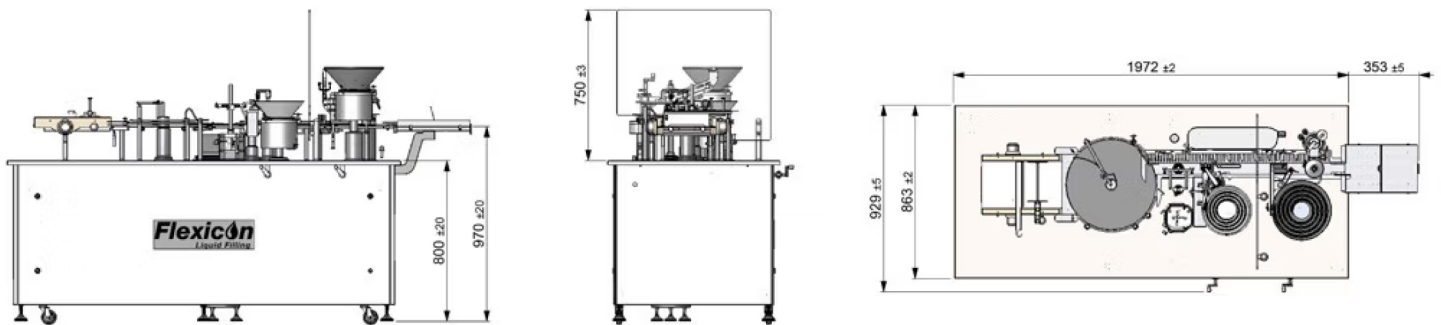

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Flexicon A/S는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 경고: 이 제품은 환자와 연결된 용도에 사용하도록 설계되지 않았으므로 그러한 용도로 사용해서는 안 됩니다. WMArchitect 및 Accusil은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



06 May 2026