

FPC50

FPC50-systeem voor vullen, gedeeltelijk afsluiten en afsluiten

Kenmerken en voordelen

- Single-use vloeistofpad en peristaltische pomp voor eenvoudige reiniging validatie en geen kruisbesmetting
- Volledige kwalificatie en validatie ondersteuning
- Kortere omsteltijd zonder vormdelen voor flesjes en universele formdelen voor stoppen en krimp/roller doppen
- In Process Control (IPC) met optionele in-line controleweging
- Naleving van FDA 21 CFR Deel 11
- Volledige batchrapportage
- Compatibel met ISO8362 componenten
- Voorbereid voor barrièresystemen (RABS) overeenkomstig Annex 1



Technische specificaties


	FPC50
Vulvolume	0.1-100 ml
Nauwkeurigheid	tot aan $\pm 0.5\%$
Max capaciteit	1500 eenheden/uur
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 25 °C (41 °F tot 77 °F)
Voeding	110/230 V AC, 220 V tot 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max 1200 W
Luchttoevoer/pneumatische aansluiting	6 bar (87 psi) tot ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Luchtverbruik	Max. 100 l/min
Interface	1 x 24 V uitgangssignaal voor gasafzuigklep; 2 x externe interface voor bv. partikelteller; Integratie met RABS
Gewicht	400 kg (882 lbs)
Vialmaat	ISO 8362 2R - 100H
Stoppers	ISO-standaard of Lyo, 13 mm en 20 mm
In- en uitvoertrays	Breedte/open uiteinde min. 200 mm/7,9 inch-max. 305 mm/12 inch

Capaciteit is de maximale doorvoercapaciteit

Constructie materialen

	FPC50
Materiaal	Geanodiseerd aluminium, POM, Roestvrij staal, Roestvrij staal AISI 316L, Teflon

FPC50 basis afmetingen

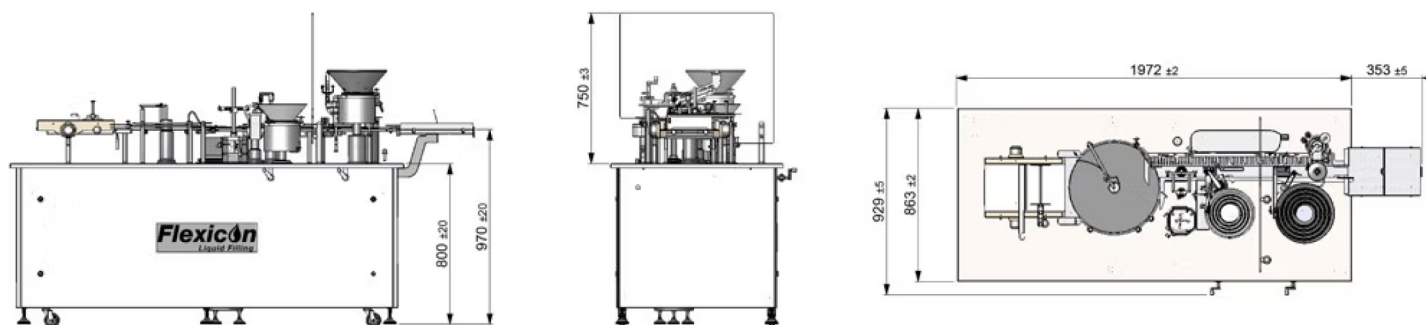

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global
06 May 2026