

621F mit Pumpenkopf 620RE

Direkt gekoppelte Pumpen der Baureihe 600

Merkmale und Vorteile


- Simplex-Fördermengen bis zu 18 l/min
- Förderdruck bis zu 4 bar mit Element-Pumpenköpfen
- 620RE Pumpenkopf mit zwei Rollen oder 620RE4 Pumpenkopf mit vier Rollen mit CIP/SIP-Rotor, schnelles Einlegen der Schläuche durch Schnappverbindung, Pumpenkopf eignet sich für industrielle und hygienische LoadSure Elemente mit 12 mm und 17 mm
- Kompaktes Design, Getriebe am Fuß montiert
- 24 Stunden Dauerbetrieb, zwei Jahre Garantie
- Umkehrbare Drehrichtung
- Optionen für feste Drehzahl: 230/460 VAC 50/60 Hz, dreiphasig oder 120/240 VAC, 50/60 Hz, einphasig. Optionen für variable Drehzahl über Antrieb mit Frequenzumrichter (VFD) 230/3/60, 460/3/60, 120/1/60 oder 220/1/60




621F mit Pumpenkopf 620RE – Leistung

Schlauchinnendurchmesser und Fördermengen (L/min)						Elemente			
	Feststehend	620R Endlosschlauch				620RE LoadSure		620RE4 LoadSure	
Werkstoff	U/min	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
Marprene, Bioprene TM	77/250					2,9/9,3	4,5/14,8	2,4/7,9	3,2/10,3
Marprene, Bioprene TL	77/250	1,0/3,3	1,9/6,3	3,1/10	4,2/11	2,9/9,3	4,7/16,9	2,4/7,9	3,6/11,8
Pumpsil Platin Silikon Neoprene, STA-PURE PCS	77/250	0,92/3,0	2,1/6,8	3,2/11	4,7-14	3,0/9,7	4,7/15	2,5/8,3	3,3/11
STA-PURE PFL	77/250	0,92/3,0	1,9/6,3	3,1/10	4,7-15	3,1/10,0	5,6/18	2,6/8,5	3,9/13


620R performance graph

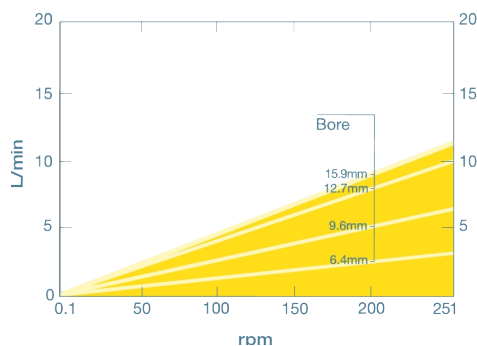

620RE performance graph

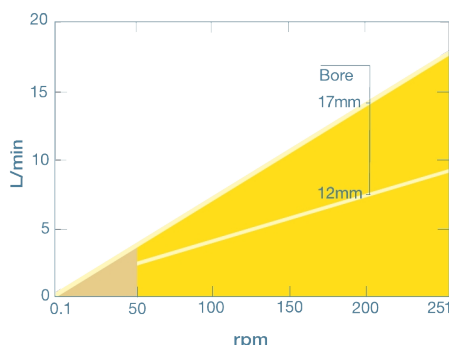

620RE4 performance graph

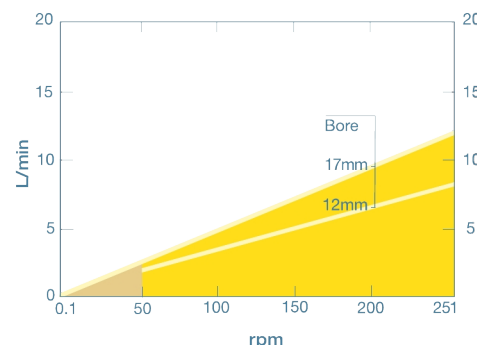

Technische Eigenschaften

	621F mit Pumpenkopf 620RE
Fördermenge	0.92 L/min bis 18 L/min
Fördermenge	0.24 USGPM bis 4.75 USGPM
Maximaler Betriebsdruck	4 bar (60 psi)
Motortypen	Motor mit fester Drehzahl
Normen	CE
Schutzart	IP55
Geräuschpegel	75 dB(A) bei 1 m
Gewicht	18.5 kg (40.43 lb)
Stromversorgung	230/400 V, 3 ph, 50 Hz

In der Tabelle sind Details für Pumpen mit fester Drehzahl aufgeführt. Weitere Informationen zu Optionen für Antriebe, Wechselstrommotoren und Frequenzumrichter erhalten Sie von Ihrer lokalen Vertretung von Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.


Werkstoffe

	621F mit Pumpenkopf 620RE
Getriebe	Gusseisen
Motor	Aluminiumgusslegierung
Pumpenkopf-Rotorbaugruppe	Fortron 1140L0 (PPS)
Dichtungen	Neoprene
Schlauchklemmen-Vorrichtung	PP (Polypropylen)

Die aufgeführten Informationen decken das gesamte Angebot an Pumpen mit fester Drehzahl ab.

Detaillierte Spezifikationen zu einzelnen Modellen/Komponenten sowie andere Optionen für Antriebe/Pumpenköpfe finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den WMFTS-Vertreter.

621F mit Pumpenkopf 620RE – Maße

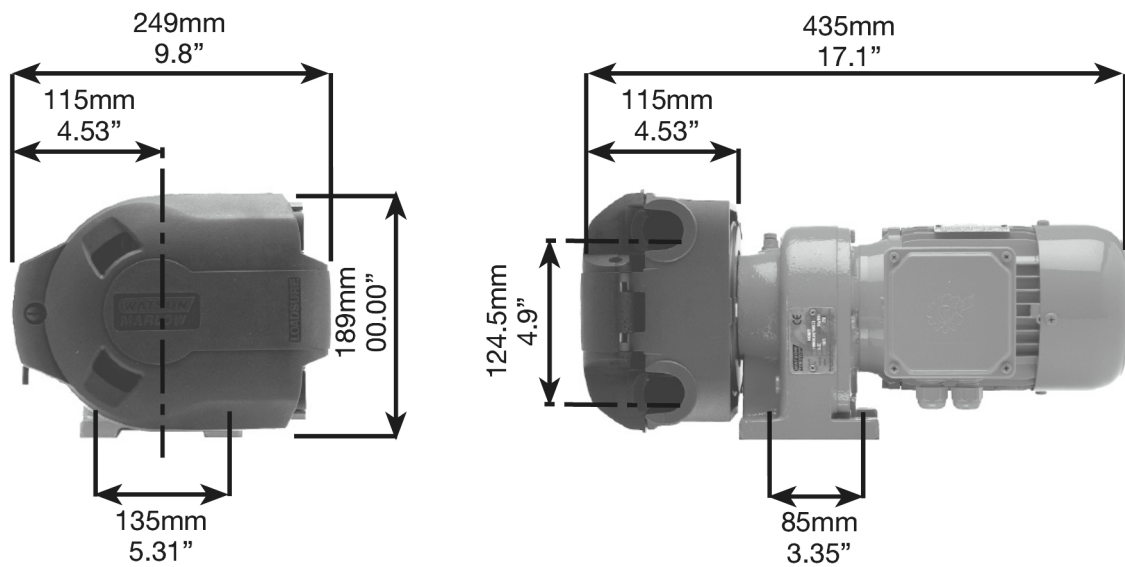

Artikelnummern

Pumpe	U/min	Versorgung	Artikelnummer
621F/RE	77	230/400 V 50 Hz 3 ph 0,37 kW	060.8122.E20 – *10:1
	250	230/400 V 50 Hz 3 ph 0,37 kW	060.8152.E20 – *5:1

*Drehzahlreduzierung von 10:1 oder 5:1 über VFD

*ATEX Pumpen, Drehzahlreduzierung von 10:1 über VFD durch Getriebereinheiten mit PTC-Thermistoren

Informationen zu alternativen Drehzahlen und Motoroptionen erhalten Sie vom Watson-Marlow Applications Engineering Department.

Pumpenkopf	Beschreibung	Artikelnummer
620RE	Pumpenkopf mit zwei Rollen für LoadSure Elemente für einen maximalen Spitzendruck von 4 bar	064.0231.000

Schläuche				
Innendurchmesser/Wand (mm)	Bioprene	Marprene	Pumpsil	PureWeld XL
6,4 x 3,2	933.0064.032	902.0064.032	913.A064.032	
9,6 x 3,2	933.0096.032	902.0096.032	913.A096.032	942.0096.032
12,7 x 3,2	933.0127.032	902.0127.032	913.A127.032	942.0127.032
15,9 x 3,2	933.0159.032	902.0159.032	913.A159.032	

Innendurchmesser/Wand (mm)	STA-PURE	STA-PURE PFL		
6,4 x 3,2	961.0064.032	966.0064.032		
9,6 x 3,2	961.0096.032	966.0096.032		
12,7 x 3,2	961.0127.032	966.0127.032		
15,9 x 3,2	961.0159.032	966.0159.032		

LoadSure Elemente				
Werkstoff	12 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF-Steckverbinder	17 mm Tri-Clamp 3/4" PVDF-Steckverbinder	12 mm C&G mit PP 3/4"-Steckverbinder	17 mm C&G mit PP 3/4"-Steckverbinder
Bioprene TL 0–2 bar (Spitzendruck)	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Bioprene TM 0–4 bar (Spitzendruck)	933.M120.PFT	933.M170.PFT		
STA-PURE PCS 0–4 bar (Spitzendruck)	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
Pumpsil (0–2 bar Spitzendruck)	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TL 0–2 bar (Spitzendruck)			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Marprene TM 0–4 bar (Spitzendruck)			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Pumpsil 0–2 bar (Spitzendruck)			913.A120.PPC	913.A170.PPC

Haftungsausschluss: Alle angegebenen Fördermengen wurden durch Pumpen von Wasser mit 20 °C (68 °F) ohne Saug- und Förderhöhe ermittelt. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene und Marprene sind Marken von Watson-Marlow Limited. Haftungsausschluss: Alle Angaben in diesem Dokument wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Watson-Marlow Limited übernimmt jedoch keine Haftung für etwaige Fehler und behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. GORE und STA-PURE sind Handelsmarken der W. L. Gore & Associates. Bei Bestellungen von Pumpen und Schlauchelementen bitte immer die Artikelnummern angeben.



wmfts.com/global
28 May 2026