

Attuatori pneumatici per valvole in linea

Attuatori pneumatici per valvole in linea

Caratteristiche e vantaggi

- Design igienico, con il numero di serie inciso al laser sul corpo dell'attuatore per garantire la completa tracciabilità del prodotto e la conformità alle norme cGMP
- Struttura leggera in acciaio inox e plastica con manicotto in acciaio inox 304 e volantino in nylon
- Opzioni di comando pneumatico per soddisfare tutte le esigenze di processo
- Indicazione visiva dello stato di apertura/chiusura
- Forza di tenuta massima di 151 psig




Specifiche tecniche

	Attuatori pneumatici per valvole in linea
Dimensioni	0,5", 0,75", 1,0", 1,5"
Indicazione della posizione	L'indicazione della posizione sui manicotti dell'attuatore manuale e sugli alberi dell'attuatore pneumatico fornisce la conferma visiva della posizione della valvola
Giunto di connessione pneumatico	Raccordo NPT da 1/8 di pollice
Dimensioni connettore tubi pneumatici	1/4 poll.
Pressione di esercizio max.	10 bar (150 psi)
Temperatura d'esercizio	Up to 135 °C (275 °F)
Pressione min. di esercizio manometro	70 psig
Pressione max. di esercizio manometro	100 psig
Valvole compatibili	Valvole per serbatoi a membrana senza barriera con tenuta radiale standard (180 gradi)
Certificazione e conformità	ISO 9001
Norme	3-A, ASME BPE, ATEX 2014/34/UE, CE Ex II2G Ex h II8 T3 Gb, CE-PED

Materiali di costruzione

	Attuatori pneumatici per valvole in linea
Alloggiamento	Acciaio inox 304, Nylon
Albero attuatore	Acciaio inox 316
O-ring	EPDM
Guarnizioni	EPDM

Dimensioni Attuatori pneumatici per valvole in linea

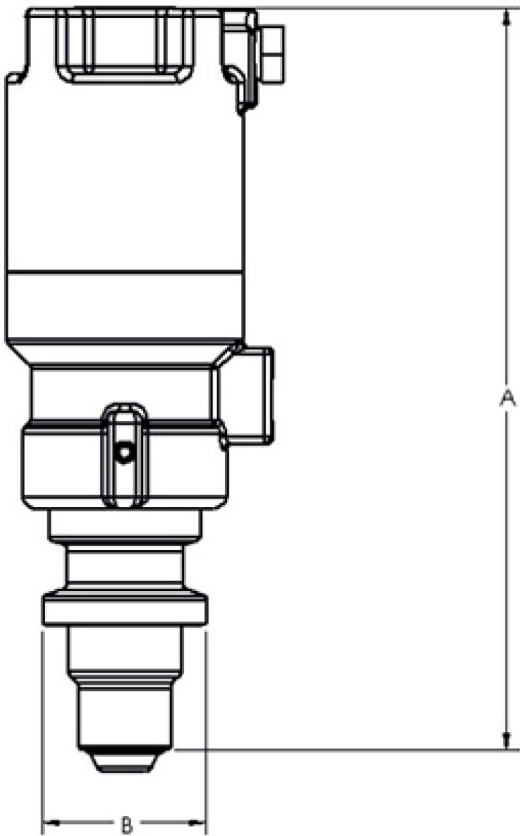

Dimensioni (pollici)	A mm (pollici)	B mm (pollici)	Corsa max mm (pollici)	Peso kg (lb)	Spazio necessario per la rimozione mm (pollici)
0,50	143,3 (5,6)	31,5 (1,2)	4,4 (0,2)	0,5 (1,0)	193,0 (7,6)
0,75	162,6 (6,4)	50,8 (2,0)	5,6 (0,2)	1,0 (2,2)	213,4 (8,4)
1,00	177,8 (7,0)	63,5 (2,5)	5,3 (0,2)	1,3 (2,9)	254,0 (10,0)
1,50	188,0 (7,4)	91,4 (3,6)	7,0 (0,3)	2,4 (5,2)	276,9 (10,9)

Codici prodotto

Numero prodotto	Descrizione prodotto
FP05-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola in linea radiale senza barriera 0,5"
IP08-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola in linea radiale senza barriera 0,75"
IP10-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola in linea radiale senza barriera 1,0"
IP15-01	Attuatore pneumatico AKS per valvola in linea radiale senza barriera 1,5"

Disclaimer: Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Asepco declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Radial diaphragm è un marchio di fabbrica di ASEPCO Corporation. Tri-Clamp è un marchio registrato di Alfa Laval Corporate AB. Azienda parte di Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, una società di Spirax-Sarco Engineering PLC.



wmfts.com/global
09 July 2026