

621F con cabezal 620R



Bombas de acoplamiento cerrado serie 600

Características y ventajas


- Caudales Simplex de hasta 15 l/min
- Presiones de descarga de hasta 2 bar con manguera continua
- Cabezal de dos rodillos 620R con rotor para CIP/SIP
- Diseño compacto con reductor montado en pie
- Servicio continuo de 24 horas con una garantía de dos años
- Operación reversible
- Opciones de velocidad fija: 230/460 VCA, 50/60 Hz, trifásico o 120/240 VCA, 50/60 Hz, monofásico. Opciones de vel. variable suministradas con accionamiento de frecuencia variable 230/trifásico/60, 460/trifásico/60, 120/monofásico/60 o 220/monofásico/60




Rendimiento de 621F con cabezal 620R

Luces de manguera y caudales (L/min)						Elementos			
	Fijo	Manguera continua 620R				620RE LoadSure		620RE4 LoadSure	
Material	rpm	6,4 mm	9,6 mm	12,7 mm	15,9 mm	12,0 mm	17,0 mm	12,0 mm	17,0 mm
Marprene, Bioprene TM	77/250					2,9/9,3	4,5/14,8	2,4/7,9	3,2/10,3
Marprene, Bioprene TL	77/250	1,0/3,3	1,9/6,3	3,1/10	4,2/11	2,9/9,3	4,7/16,9	2,4/7,9	3,6/11,8
Neoprene de silicona curada al platino de Pumpsil, PCS de STA-PURE	77/250	0,92/3,0	2,1/6,8	3,2/11	4,7-14	3,0/9,7	4,7/15	2,5/8,3	3,3/11
STA-PURE PFL	77/250	0,92/3,0	1,9/6,3	3,1/10	4,7-15	3,1/10,0	5,6/18	2,6/8,5	3,9/13


620R performance graph

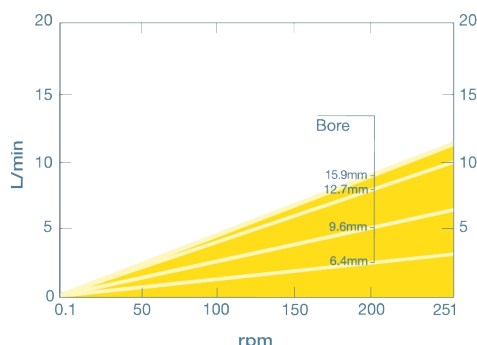

620RE performance graph

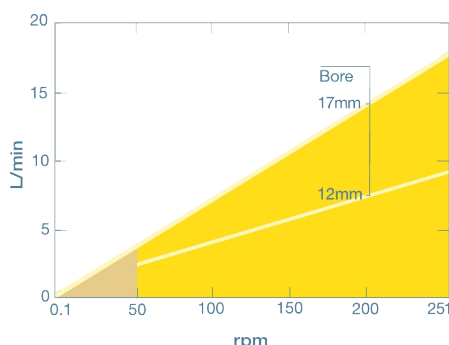

620RE4 performance graph

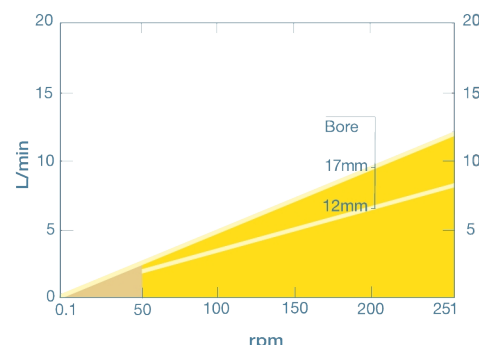

Especificaciones técnicas

	621F con cabezal 620R
Flujo	0.92 l/min a 15 l/min.
Flujo	0.24 USGPM a 3.96 USGPM
Presión máx. de operación	2 bar (30 psi)
Tipos de motor	Motor de velocidad fija
Normas	CE
Protección contra la contaminación	IP55
Ruido	75 dB (A) a 1 m
Peso	18.5 kg (40.43 lb)
Fuente de alimentación	230/400 V, trifásico, 50 Hz


La tabla enumera los detalles de las bombas de velocidad fija. Para obtener más información sobre las opciones de accionamiento, motor de CA e inversor, póngase en contacto con su representante local de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Materiales de construcción

	621F con cabezal 620R
Reductor	Hierro fundido
Motor	Aleación de aluminio fundido
Conjunto del rotor del cabezal	Fortron 1140L0 (PPS)
Sellos	Neoprene
Conjunto de abrazadera de manguera	PP (polipropileno)

La información indicada cubre la gama completa de bombas de velocidad fija.
Para obtener especificaciones detalladas de modelos/componentes individuales y otras opciones de accionamiento/cabezal, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con el representante del WMFTS.

Dimensiones de 621F con cabezal 620R

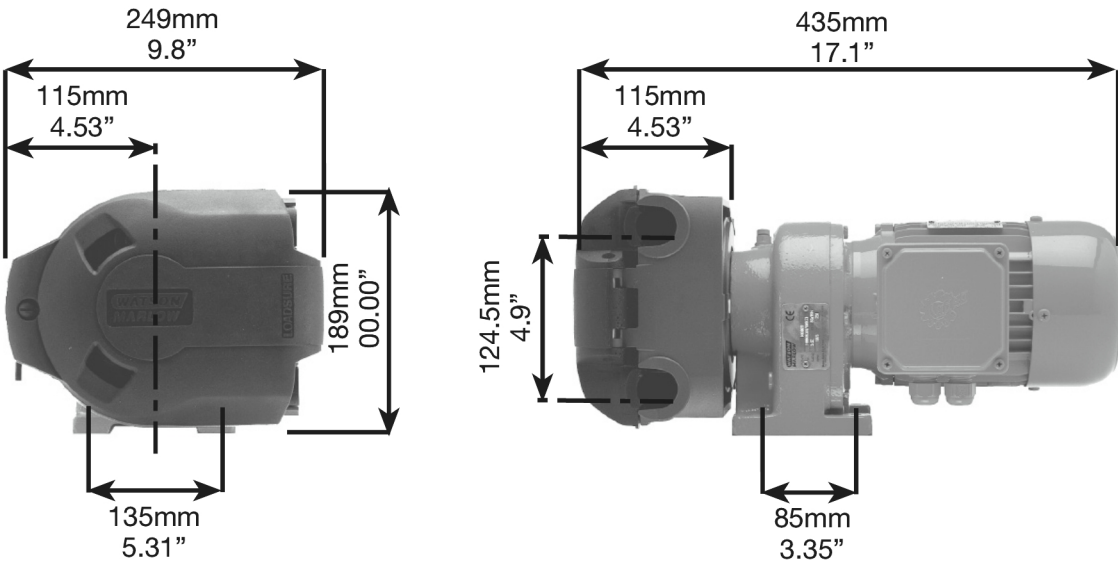

Códigos de productos

Tipo	rpm	Suministro	Código de producto
621F/R	77	230/400V 50Hz trifásico 0,37kW	060.8122.020 - *10:1
	250	230/400V 50Hz trifásico 0,37kW	060.8152.020 - *5:1

*Reducción de velocidad de 10:1 o 5:1 usando un accionamiento de frecuencia variable

*Bombas ATEX con reducción de velocidad de 10:1 disponible usando un accionamiento de frecuencia variable en unidades con reductor equipadas con termistores PTC

Para obtener información sobre velocidades alternativas y opciones de motor, póngase en contacto con el departamento de ingeniería de aplicaciones de Watson-Marlow.

Cabezal	Descripción	Código de producto
620R	Cabezal de manguera continua con dos rodillos para una presión máxima de 2 bar	064.0211.000

Mangueras					
Diámetro interno/pared (mm)		El tubo para bombas peristálticas Bioprene	Marprene	Pumpsil	PureWeld XL
6,4x3,2		933.0064.032	902.0064.032	913.A064.032	
9,6x3,2		933.0096.032	902.0096.032	913.A096.032	942.0096.032
12,7x3,2		933.0127.032	902.0127.032	913.A127.032	942.0127.032
15,9x3,2		933.0159.032	902.0159.032	913.A159.032	
Diámetro interno/pared (mm)		STA-PURE	STA-PURE PFL		
6,4x3,2		961.0064.032	966.0064.032		
9,6x3,2		961.0096.032	966.0096.032		
12,7x3,2		961.0127.032	966.0127.032		
15,9x3,2		961.0159.032	966.0159.032		

Elementos LoadSure				
Material	Conectores Tri-Clamp de 12 mm con conectores de PVDF de 3/4"	Conectores Tri-Clamp de 17 mm con conectores de PVDF de 3/4"	Conectores cam & groove de 12 mm con conectores de PP de 3/4"	Conectores cam & groove de 17 mm con conectores de PP de 3/4"
Bioprene TL 0-2 bar (pico)	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Bioprene TM 0-4 bar (pico)	933.M120.PFT	933.M170.PFT		
STA-PURE PCS 0-4 bar (pico)	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
Pumpsil (pico de 0-2 bar)	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TL 0-2 bar (pico)			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Marprene TM 0-4 bar (pico)			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Pumpsil 0-2 bar (pico)			913.A120.PPC	913.A170.PPC

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W. L. Gore & Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.



wmfts.com/global
28 May 2026