

620Di e 620DiN com cabeçote 620REH

bombas de distribuição da série 620

Recursos e benefícios

- Entrada do teclado de fluxo de 0,001 L/min a 18 L/min
- Distribui 500 ml com precisão de $\pm 0,5$ %
- Armazena até 50 programas de distribuição
- Pressão de até 4 bar
- Relação de controle de 2650:1 (gama de velocidades de 0,1 a 265 rpm)
- Ajuste digital de velocidade com opção de mudanças de passo de 0,1 rpm, 0,5 rpm, 1 rpm, 2 rpm, 5 rpm e 10 rpm
- Motor de corrente contínua (DC) sem escova e quase sem manutenção
- Gabinete fácil de limpar e sem armadilhas de insetos



Desempenho 620Di e 620DiN com cabeçote 620REH

Faixas de vazão (L/min)	Mangueira do elemento LoadSure™	
(gama de velocidades de mais de 0,1 a 265 rpm)	620REH (2 roletes)	
Material da mangueira	12mm	17mm
Marprene TM, Bioprene TM	0,003-8,3	0,004-11
Marprene TL, Bioprene TL	0,003-8,3	0,005-12
Pumpsil silicone	0,003-8,7	0,004-11
STA-PURE PCS	0,003-9,0	0,010-13
Tamanhos de dose do 620RE4		
Diâmetro interno da mangueira	12mm	17mm
Dose mínima possível	16 ml	21 ml
Mínimo recomendado	164 ml	208 ml


Especificações técnicas

	620Di e 620DiN com cabeçote 620REH
Faixa do volume de envase	Up to 500ml in 3.0s ml
Precisão	$\pm 0,5$ %
Proteção de entrada	IP31, IP66, NEMA 2, NEMA 4X
Faixas de temperatura de operação	5°C a 40°C (40°F a 104°F)
Razão de controle de velocidade	2650:1
Umidade	(Condensação) 10 a 100% de UR, (Sem condensação) 80% até 31 °C (88 °F) diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C (104 °F)
Ruído	<70 dB(A) a 1 m
Normas	CE, cETLus
Fonte de alimentação	100 V a 120 V, 200 V a 240 V, 50/60 Hz, Monofásico
Peso	20.1 - 21 kg (44.3 - 46.3 lb)
Acessórios	Pedal, interruptor manual, cabo RS232, cabo de registros em lote
Tamanho de mangueira compatível	DI 12,0 mm, DI 12,7 mm, DI 15,9 mm, DI 17,0 mm, DI 6,4 mm, DI 9,6 mm

Materiais de construção

	620Di e 620DiN com cabeçote 620REH
Mancais	Aço carbono
Gabinete	Alumínio fundido sob pressão LM24, Alumínio fundido sob pressão LM6
Teclado/HMI	Poliéster
Conjunto do rolete do cabeçote	Aço inox, Nylatron

Dimensões 620Di e 620DiN com cabeçote 620REH

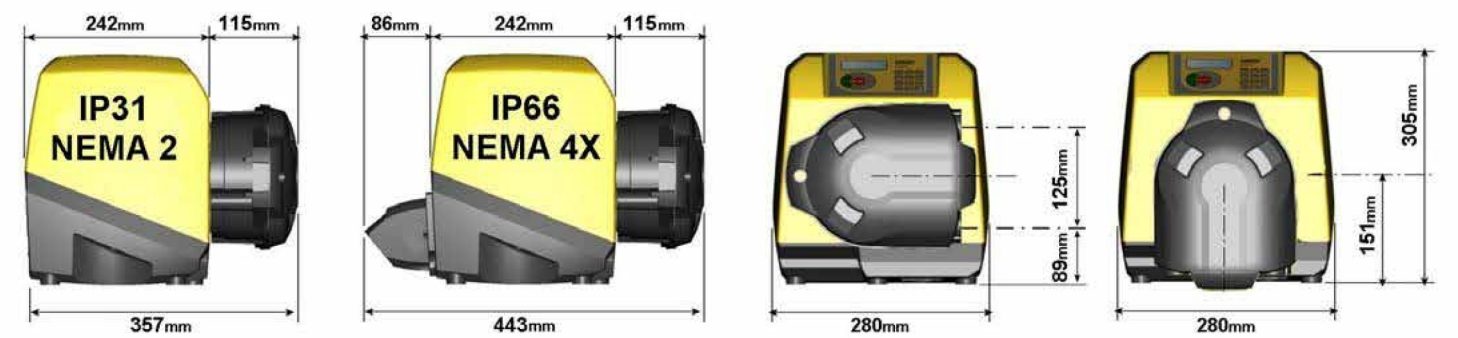

Opções de controle

Funcionalidade	620Di	620DiN
Compartimento - classificação de proteção contra entrada	IP31	IP66
Controle manual		
Controle digital de velocidade com calibração simples para exibir o fluxo	✓	✓
Opção de exibição da vazão; unidades métricas ou imperiais	✓	✓
Teclado numérico para entrada de velocidade, fluxo ou código PIN	✓	✓
Controle remoto		
Funcionamento/parada, mudança de direção, modo automático/manual, entrada do detetor de vazamento (através do fechamento de contato ou lógica TTL de 5 V ou industrial de 24 V)	✓	✓
Funcionamento remoto da dosagem (pedal/chave ou entrada lógica)	✓	✓
Quatro saídas digitais programáveis de status por meio da lógica TTL de 5 V a industrial de 24 V.		✓
Resposta analógica de velocidade		
Saída do tacômetro; 0-1478Hz	✓	✓
Comunicação digital		
Controle serial de rede digital RS232 RS485	RS232	RS485
Funcionalidade de distribuição especializada		
Recurso de controle de gotejamento (inversão momentânea da direção no final da dose)	✓	✓
Controle de rampa para melhorar a precisão e evitar respingos ou espuma	✓	✓
Exportação de registros em lote para PC ou impressora para requisitos cGMP RS232	RS232	
Proteção do código PIN do operador/supervisor duplo das configurações da bomba	✓	✓

Códigos de produto

Cabeçotes		Acessórios			
Cabeça 620RE4 MkII		Pedal	Chave manual	Cabo RS232	Cabo de registros em lote
Somente cabeçote	063.4431.000				
Bombas de limpeza IP31/NEMA 2		IP31	IP31	IP31	IP31
620Di/REH	060.4171.E40*	059.3002.000	059.3022.000	059.3121.000	059.3125.000
* Troque o último zero com A, E, U, K, R, D, Z ou C para plugue de rede americano de 2,8 m, europeu, britânico, australiano, argentino, sul-africano, chinês ou suíço					
Bombas de lavagem IP66/NEMA 4X		IP55			
620DiN/REH	060.417N.E40**	069.5231.000	n/a	n/a	—
** Troque o último zero pelo tipo de pluge A, C, K, R ou Z					
Mangueiras					
	Elementos sanitários LoadSure™ (conectores Tricamp PVDF de 3/4")		Elementos industriais LoadSure™ (conectores PP com came e ranhura de 3/4")		
	12mm	17mm	12mm	17mm	
STA-PURE PCS	961.0120.PFT	961.0170.PFT	—	—	
Bioprene TM	933.P120.PFT	933.P170.PFT	—	—	
Bioprene TL	933.0120.PFT	933.0170.PFT	—	—	
Marprene TM	—	—	902.P120.PPC	902.P170.PPC	
Marprene TL	—	—	902.0120.PPC	902.0170.PPC	
Pumpsil silicone	913.A120.PFT	913.A170.PFT	913.A120.PPC	913.A170.PPC	
NB: Capacidade de pressão de 4 bar com Sta-Pure PCS, Bioprene TM e Marprene TM					

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
14 July 2025