

# FPC60

FPC60 volautomatisch en afvul- en afsluitsysteem

## Kenmerken en voordelen


- Voorbereid voor barrièresystemen in overeenstemming met Annex 1
- Minimaliseer besmettingsrisico door ontbreken van operator ingrijpen en automatische instelling
- Zeer nauwkeurig, met precisie vullen van volumes van 0.2-100 ml at tot aan  $\pm 0.5\%$
- Minder stilstand en meer productietijd, geen gereedschap nodig en minimale instellingen tussen batches
- Opstarten zonder verspilling en geen vormdelen voor geen enkele flessoort
- Volledig audit trail van operator wijzigingen
- Digitale toegang op afstand en aparte servicekast



## Technische specificaties

|                     | FPC60                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vulvolume           | 0.2-100 ml                                                                                                                                                       |
| Nauwkeurigheid      | tot aan $\pm 0.5\%$                                                                                                                                              |
| Max capaciteit      | 1500 eenheden/uur                                                                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuur | 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)                                                                                                                                |
| Voeding             | 200 V tot 240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| Stroomverbruik      | Max 3200 W                                                                                                                                                       |
| Gewicht             | 1800 kg (3968 lbs)                                                                                                                                               |
| Vialmaat            | ISO 8362 2R - 100H, 2 mL - 100 mL CZ flesjes                                                                                                                     |
| Stoppers            | ISO-standaard of Lyo, 13 mm en 20 mm                                                                                                                             |
| In- en uitvoertrays | Breedte invoer tray: 185 mm – 360 mm, breedte uitvoer tray: 180 mm – 360 mm, invoer voor voorgesteriliseerde, adaptiQ + EZfill RTU flesjes in trays is optioneel |

## FPC60 Afmetingen

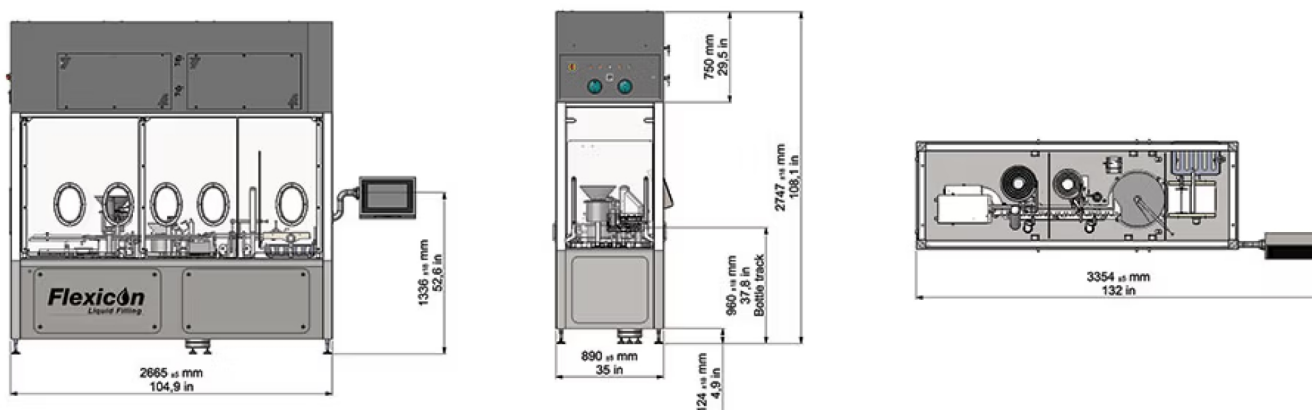

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor apparaten en toepassingen die met patiënten worden gebruikt. WMArchitect en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.



wmfts.com/global  
06 May 2026