

FPC60

Sistema di riempimento/tappatura completamente automatico FPC60

Caratteristiche e vantaggi


- Preparato per sistemi di barriera in conformità con l'Allegato 1.
- Riduzione del rischio di contaminazione senza l'intervento dell'operatore e con l'impostazione automatica
- Riempimento altamente accurato e di precisione da volumi di 0.2-100 ml a fino a $\pm 0,5\%$
- Riduzione dei tempi di inattività e aumento dei tempi di esercizio senza l'uso di strumenti e con una configurazione minima tra un lotto e l'altro
- Avviamento a zero rifiuti e assenza di ricambi per il formato per l'intera gamma di flaconi
- Registrazione completa delle modifiche dell'operatore
- Accesso digitale remoto e armadio di servizio separato



Specifiche tecniche

	FPC60
Volume di riempimento	0.2-100 ml
Precisione	fino a $\pm 0,5\%$
Capacità max	1500 unità/ora
Temperatura d'esercizio	5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
Alimentazione	50/60 Hz, Da 200 V a 240 V CA
Potenza assorbita	Max 3200 W
Peso	1800 kg (3968 lb)
Dimensioni flacone	ISO 8362 2R - 100H, flaconi CZ 2 mL - 100 mL
Tappi	Standard ISO o Lyo, 13 mm e 20 mm
Vassoi di alimentazione e di uscita	Larghezza vassoio di entrata: 185 mm – 360 mm, larghezza vassoio di uscita: 180 mm - 360 mm, alimentazione per flaconi pre-sterilizzati, adaptiQ + EZfill RTU in vaschette è opzionale

Dimensioni FPC60

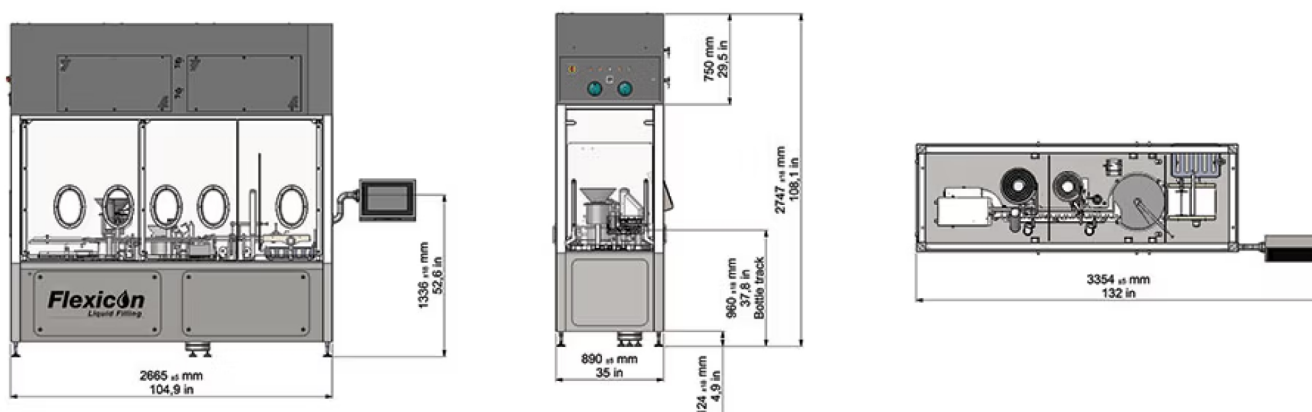

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e non devono, pertanto, essere usati per tali applicazioni. WMArchitect e Accusil sono marchi registrati.



wmfts.com/global
06 May 2026