

621F (620RE4 ポンプヘッド ド

**WATSON
MARLOW**
Pumps

600 シリーズのクローズカップリングポンプ

機能と利点


- 最大単式流量13L/min
- エレメント式ポンプヘッドにより、最大吐出圧力4bar
- 620RE 2ロー式または620RE4 4ロー式ポンプヘッド（CIP/SIPロータと高速スナップフィットチューブ装着機能付き）は、12mmおよび17mmの工業用とサニタリー用LoadSureエレメントの両方に対応しています
- コンパクトなデザインで、足部に取り付けられたギアボックス
- 2年間の保証付きの24時間連続使用
- リバーシブル操作
- 固定速度オプション: AC230/460V、50/60Hz三相またはAC120/240V、50/60Hz単相。230/3/60、460/3/60、120/1/60 or 220/1/60可変周波数ドライブで提供される可変速度オプション




621F (620RE4 ポンプヘッド性能

チューブ口径および流量 (L/min)	エレメント								
	固定	620R 連続チューブ				620RE LoadSure		620RE4 LoadSure	
材質	rpm	6.4mm	9.6mm	12.7mm	15.9mm	12.0mm	17.0mm	12.0mm	17.0mm
Marprene、Bioprene TM	77/250					2.9/9.3	4.5/14.8	2.4/7.9	3.2/10.3
Marprene、Bioprene TL	77/250	1.0/3.3	1.9/6.3	3.1/10	4.2/11	2.9/9.3	4.7/16.9	2.4/7.9	3.6/11.8
Pumpsil 白金シリコンNeoprene、STA-PURE PCS	77/250	0.92/3.0	2.1/6.8	3.2/11	4.7-14	3.0/9.7	4.7/15	2.5/8.3	3.3/11
STA-PURE PFL	77/250	0.92/3.0	1.9/6.3	3.1/10	4.7-15	3.1/10.0	5.6/18	2.6/8.5	3.9/13


620R performance graph

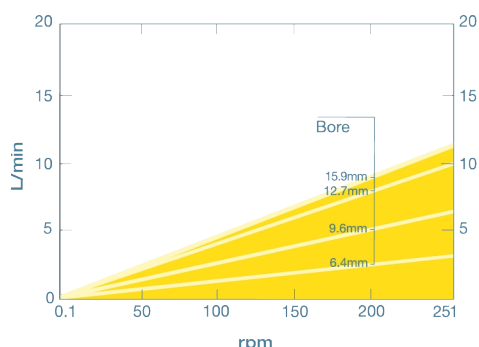

620RE performance graph

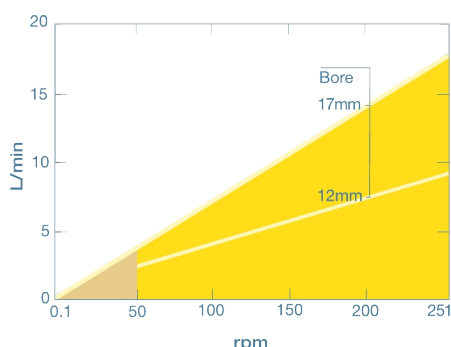

620RE4 performance graph

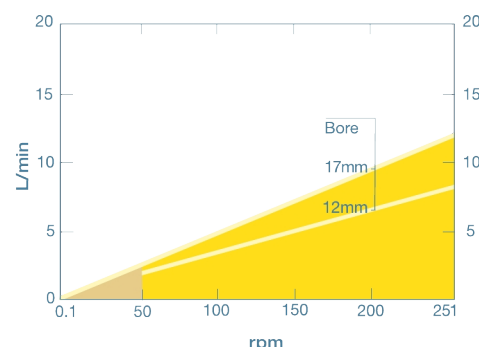

技術仕様

621F (620RE4 ポンプヘッド	
流量	0.92L/min~13 L/min
流量	0.24USGPM~3.43 USGPM
最大使用圧力	4bar (60psi)
モータータイプ	固定速度モーター
規格	CE
保護等級	IP55
ノイズ	1mで75dB (A)
重さ	18.5 kg (40.43 lbs)
電源	230/400 V 3 PH、50 Hz


固定速度ポンプの詳細を表に示します。ドライブ、AC モーター、インバータオプションの詳細については、最寄りの Watson-Marlow Fluid Technology Solutions セールスエンジニアにお問い合わせください。

構成材質

	621F（620RE4 ポンプヘッド
ギアボックス	鋳鉄
モーター	鋳造アルミニウム合金
ポンプヘッドローターアセンブリ	Fortron 1140L0 (PPS)
シール	Neoprene
チューブクランプアセンブリ	PP（ポリプロピレン）

記載されている情報は、固定速度ポンプの全範囲を対象としています。
個々のモデル / コンポーネントおよびその他のドライブ / ポンプヘッドオプションの詳細な仕様については ' ユーザーマニュアルを参照するか 'WMFTS のセールスエンジニアにお問い合わせください

621F（620RE4 ポンプヘッド寸法

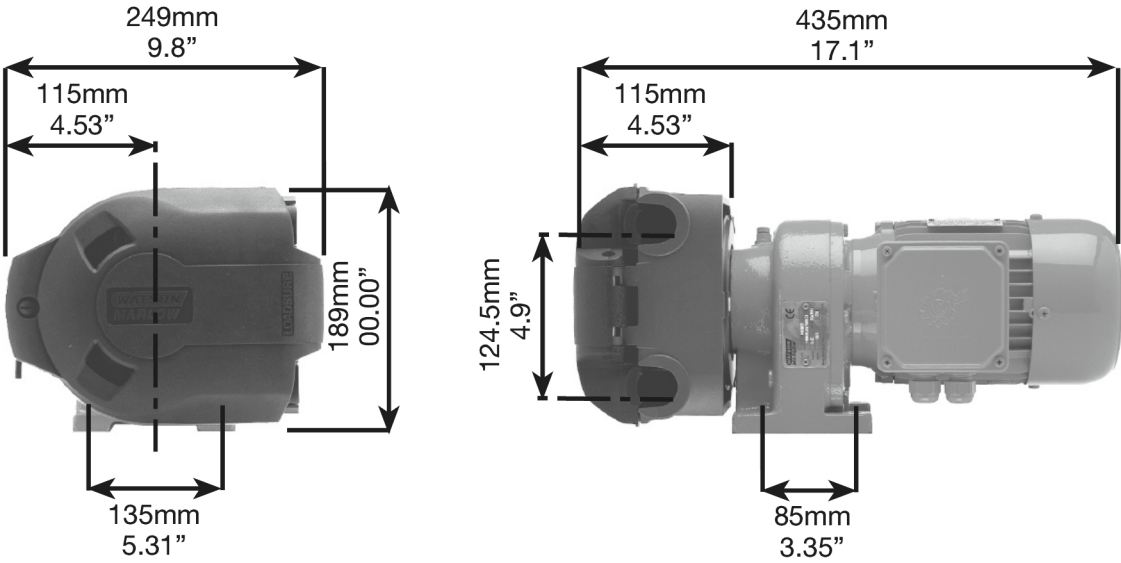

製品コード

ポンプ	rpm	供給	製品コード
621F/RE4	77	230/400V 50Hz 3ph 0.37kW	060.8122.E40 - * 10 : 1
	250	230/400V 50Hz 3ph 0.37kW	060.8152.E40 - * 5 : 1

※ 10 : 1 または 5 : 1 の減速は VFD を使用して可能です
* ATEX ポンプ 10 : 1 速度低減は、PTC サーミスタを装備したギアユニットから VFD を使用して利用できます
別の速度とモーターオプションについては、Watson-Marlow Applications Engineering Department にお問い合わせください。

ポンプヘッド	説明	製品コード
620RE4	最大 4 bar のピーク圧に対応する 4 ローラ LoadSure エLEMENT ポンプヘッド	064.0431.000

チューブ				
口径 /肉厚(mm)	Bioprene	Marprene (マープレン)	Pumpsil	PureWeld XL
6.4x3.2	933.0064.032	902.0064.032	913.A064.032	
9.6x3.2	933.0096.032	902.0096.032	913.A096.032	942.0096.032
12.7x3.2	933.0127.032	902.0127.032	913.A127.032	942.0127.032
15.9x3.2	933.0159.032	902.0159.032	913.A159.032	
口径 /肉厚(mm)	STA-PURE (スタピュア)	STA-PURE PFL		
6.4x3.2	961.0064.032	966.0064.032		
9.6x3.2	961.0096.032	966.0096.032		
12.7x3.2	961.0127.032	966.0127.032		
15.9x3.2	961.0159.032	966.0159.032		

LoadSure エLEMENT				
材質	12mm Tri-Clamp 3/4 インチ PVDF コネクタ	17mm Tri-Clamp 3/4 インチ PVDF コネクタ	12mm C および G 、 PP 3/4 インチコネクタ付き	17mm C および G 、 PP 3/4 インチコネクタ付き
Bioprene TL 0-2 bar (ピーク)	933.0120.PFT	933.0170.PFT		
Bioprene TM 0-4 bar (ピーク)	933.M120.PFT	933.M170.PFT		
STA-PURE PCS 0 ~ 4 bar (ピーク)	961.0120.PFT	961.0170.PFT		
Pumpsil (0 ~ 0.2 MPa peak)	913.A120.PFT	913.A170.PFT		
Marprene TL 0 ~ 0.2 MPa (ピーク)			902.0120.PPC	902.0170.PPC
Marprene TM 0 ~ 4 bar (ピーク時)			902.P120.PPC	902.P170.PPC
Pumpsil 0 ~ 0.2 MPa (ピーク)			913.A120.PPC	913.A170.PPC

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態 で 20 ° C (68 ° F) で水を移送した場合のものです。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、BiopreneおよびMarpreneはWatson-Marlow Limitedの登録商標です。免責条項: 本書に含まれる情報は、正確であると考えられているものの、Watson-Marlow Limitedはこれに含まれる間違いには責任を負わず、事前通知なしで仕様を変更する権利を留保しています。GOREおよびSTA-PUREは、W. L. Gore & Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



28 May 2026