

FPC50

Sistema de enchimento, aplicação de rolhas e de tampas FPC50

Recursos e benefícios

- Via de fluido e bomba peristáltica de utilização única para uma validação de limpeza simples e sem contaminação cruzada
- Apoio total à qualificação e validação
- Tempo de mudança mais rápido com peças sem formato para frascos e peças com formato universal para rolhas e tampas de cravar/rolete
- Controlo no processo (IPC) com verificação de pesagem em linha opcional
- Conformidade com a Parte 11 da FDA 21
- Relatório completo por lotes
- Compatível com componentes ISO8362
- Preparado para sistemas com barreira (RABS) em conformidade com o Anexo 1



Especificações técnicas


	FPC50
Volume de enchimento	0.1-100 ml
Precisão	Até $\pm 0,5\%$
Capacidade máxima	1500 Unidades/hora
Temperatura de operação	5 °C a 25 °C (41 °F a 77 °F)
Fonte de alimentação	110/230 V CA, 220 V a 240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energia	Max 1200 W
Abastecimento de gás/conexão pneumática	6 bar (87 psi) de acordo com ISO 8573-1 2010 [1:4:2]
Consumo de ar	Máx. 100 L/min
Interface	1 x sinal de saída de 24 V para válvula de purga de gás; 2 x interface externa para, por exemplo, contador de partículas; Integração com RABS
Peso	400 kg (882 lb)
Tamanho do frasco	ISO 8362 2R - 100H
Batentes	Norma ISO ou Lyo, 13 mm e 20 mm
Tabuleiros de entrada e saída	Largura/extremidade aberta min. 200mm/7,9"-máx. 305mm/12"

A capacidade é a capacidade máxima

Materiais de construção

	FPC50
Material	Aço inoxidável, Aço inoxidável AISI 316L, Alumínio anodizado, POM, Teflon

FPC50 dimensões básicas

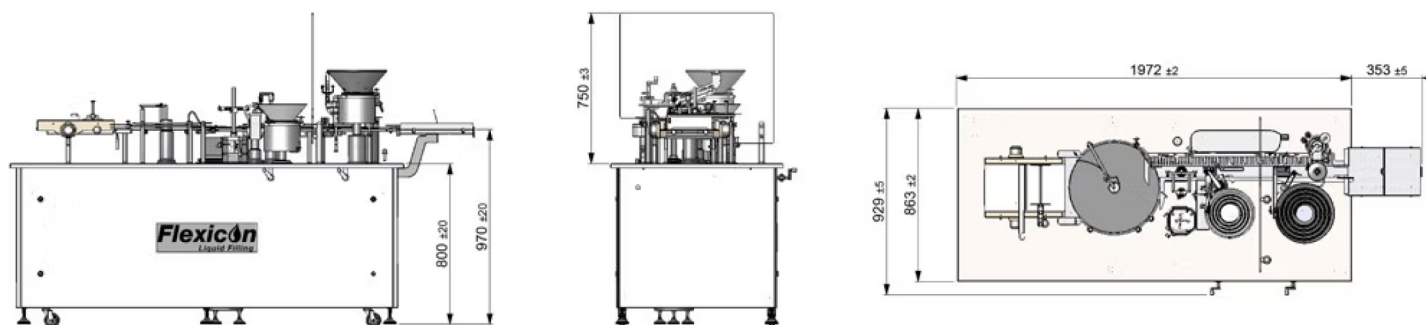

Isenção de responsabilidade: As informações deste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Flexicon A/S não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio. ADVERTÊNCIA: Estes produtos não foram projetados para uso, nem devem ser usados, em aplicações conectadas a pacientes. WMArchitect e Accusil são marcas comerciais registradas.



wmfts.com/global
06 May 2026